

## アクティベーション方法


- [Signals ChemDraw を購入した場合](#)
- Signals ChemDraw 以外 (ChemDraw Prime、ChemDraw Professional、ChemOffice) を購入した場合
  - [オンラインでアクティベーションを行う場合](#)
  - [ファイルのアップロードでアクティベーションを行う場合](#)

Signals ChemDraw を購入した場合


**注意！** アクティベーションを実施したい PC は、インターネットに接続可能である必要があります。

**注意！** 本アクティベーション実施後に 30 日間が経過すると、自動でアクティベーションが外れるため、30 日置きに本アクティベーションを実施する必要があります。

1. 製品起動時に、Licensing ウィンドウが表示されます。**Signals account** を選択し、**Continue** をクリックします。

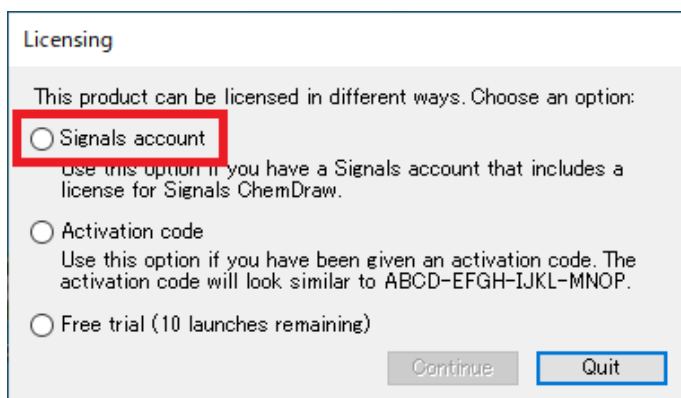


2. テナントの URL を入力し、**Sign In** をクリックします。

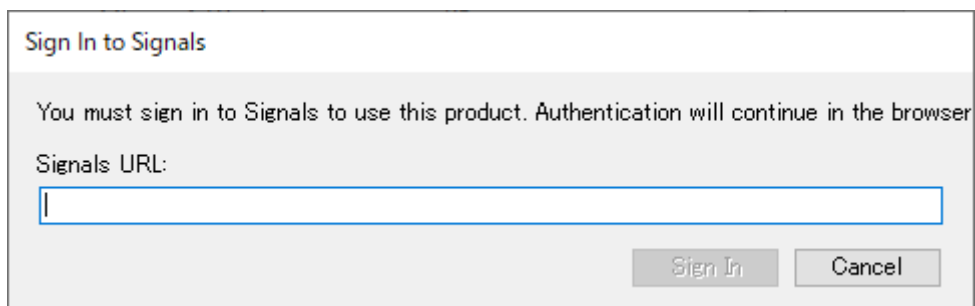

3. テナントのログイン画面にて、
- ログイン ID (通知メールが配信されたメールアドレス)
  - パスワード

上記 2 点を入力し **SIGN IN** をクリックします。

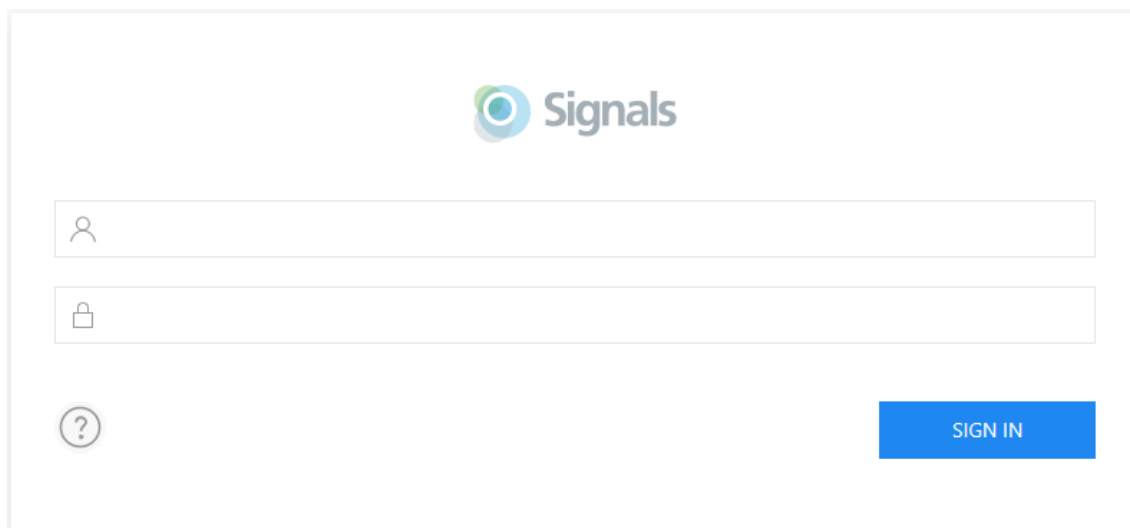

The image shows the login interface for a tenant in the Signals application. At the top center is the 'Signals' logo, which consists of a blue circular icon with a white dot inside, followed by the word 'Signals' in a sans-serif font. Below the logo are two input fields. The first field has a person icon on the left and is for the login ID. The second field has a lock icon on the left and is for the password. Below these fields is a link icon (a question mark inside a circle) on the left and a blue button labeled 'SIGN IN' on the right.

4. 下図が表示されます。**開く**をクリックして、アクティベーションの完了です。




The image shows an activation dialog box. The text inside reads: 'このサイトは、ChemDraw 23 を開こうとしています。' (This site is trying to open ChemDraw 23). Below this is a URL: 'https://[redacted]signalsresearch.revivitycloud.jp' followed by 'では、このアプリケーションを開くことを要求しています。' (where, this application is required to be opened). There is a checkbox followed by the text: '[redacted]signalsresearch.revivitycloud.jp が、関連付けられたアプリでこの種類のリンクを開くことを常に許可する' ([redacted]signalsresearch.revivitycloud.jp always allows opening this type of link with the associated application). At the bottom right are two buttons: a grey button labeled '開く' (Open) and a blue button labeled 'キャンセル' (Cancel).

Signals ChemDraw 以外 (ChemDraw Prime、ChemDraw Professional、ChemOffice) を購入した場合

オンラインでアクティベーションを行う場合


1. 製品起動時に、Licensing ウィンドウが表示されます。**Activation Code** を選択し、**Continue** をクリックします。

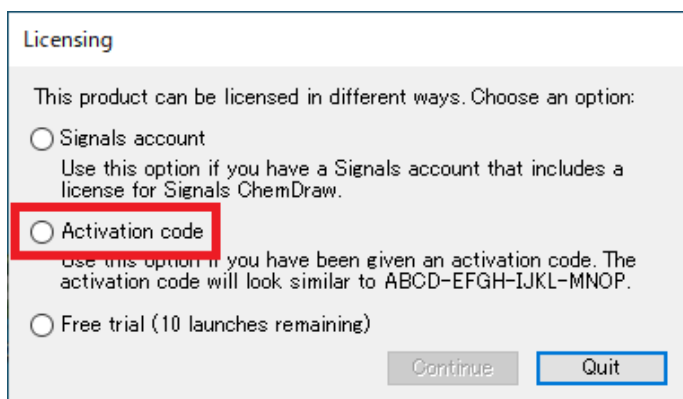

2. アクティベーションウィンドウが表示されます。各フィールドに


- Name
- Organization
- Email
- Activation Code

を入力し、「**Activate or deactivate online**」を選択して **Activate** ボタンをクリックします。

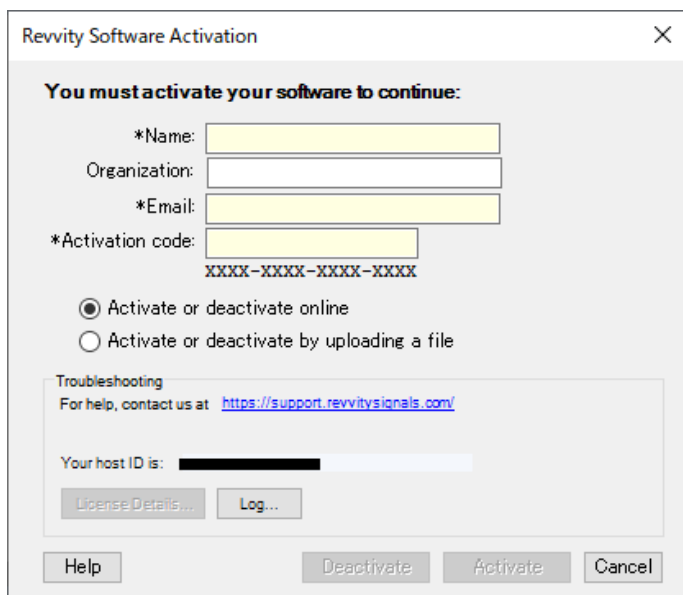


※ Activation Code は、Revvity Signals Download Center にログインして確認可能です。

3. インターネットを通じて、開発元のアクティベーションサーバーにアクセスし、アクティベーションが実行されます。アクティベーションが成功すると、確認メッセージが表示されます。

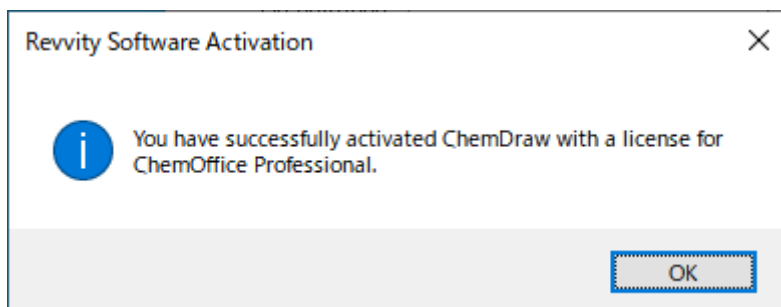

なお、プロキシサーバーやセキュリティソフトによって、アクティベーションサーバーへのアクセスが制限されていると、エラーメッセージが表示されます。

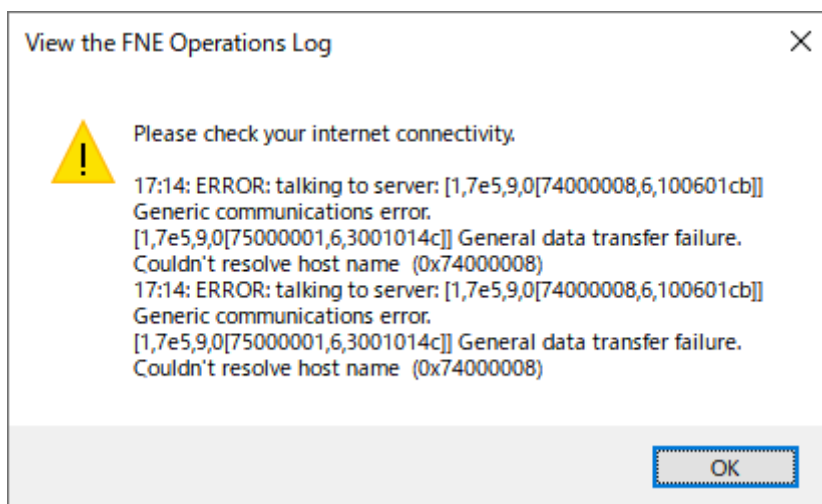


上記エラーメッセージが表示される場合は、[ファイルのアップロードでアクティベーション](#)をお試しください。

ファイルのアップロードでアクティベーションを行う場合

**重要！** 一連の作業は、24 時間以内に完了する必要があります。


1. 製品起動時に、Licensing ウィンドウが表示されます。**Activation Code** を選択し、**Continue** をクリックします。

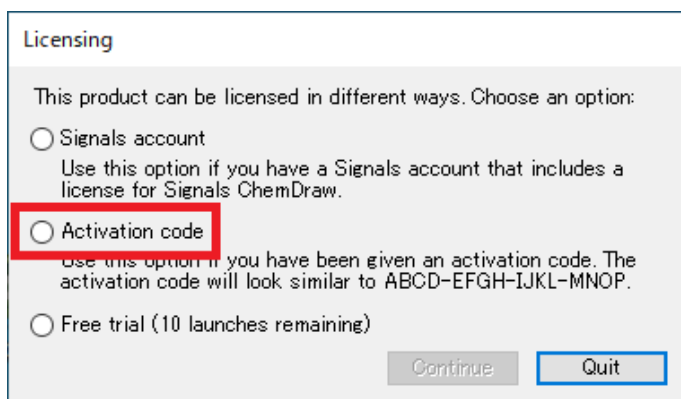

2. アクティベーションウィンドウが表示されます。各フィールドに

- Name
- Organization
- Email
- Activation Code

を入力し、「**Activate or deactivate by uploading a file**」を選択して **Activate** ボタンをクリックします。

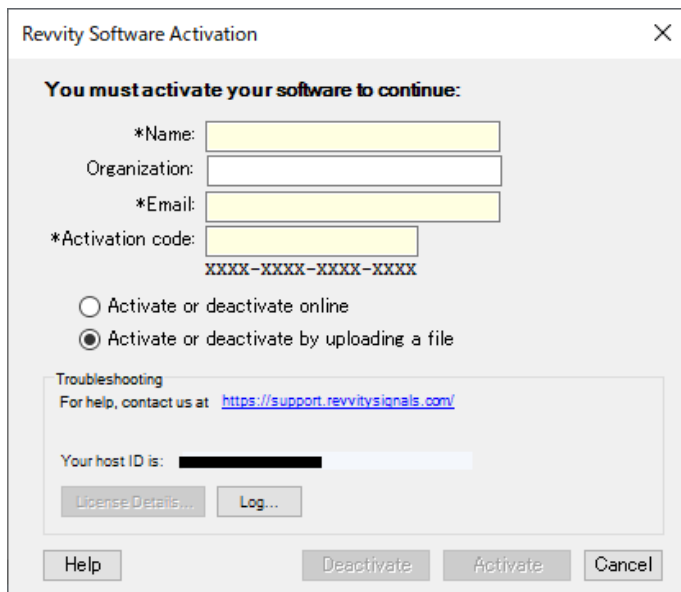


※ Activation Code は、Revvity Signals Download Center にログインして確認可能で

す。

※ v20 以前の場合は、左下の **More Options** ボタンをクリックし、ウィンドウを展開する必要があります。

3. ActCapRequest\_xxxxxxx.bin ファイルの保存先を確認するメッセージが表示されます。デスクトップ等を指定してファイルを保存します。

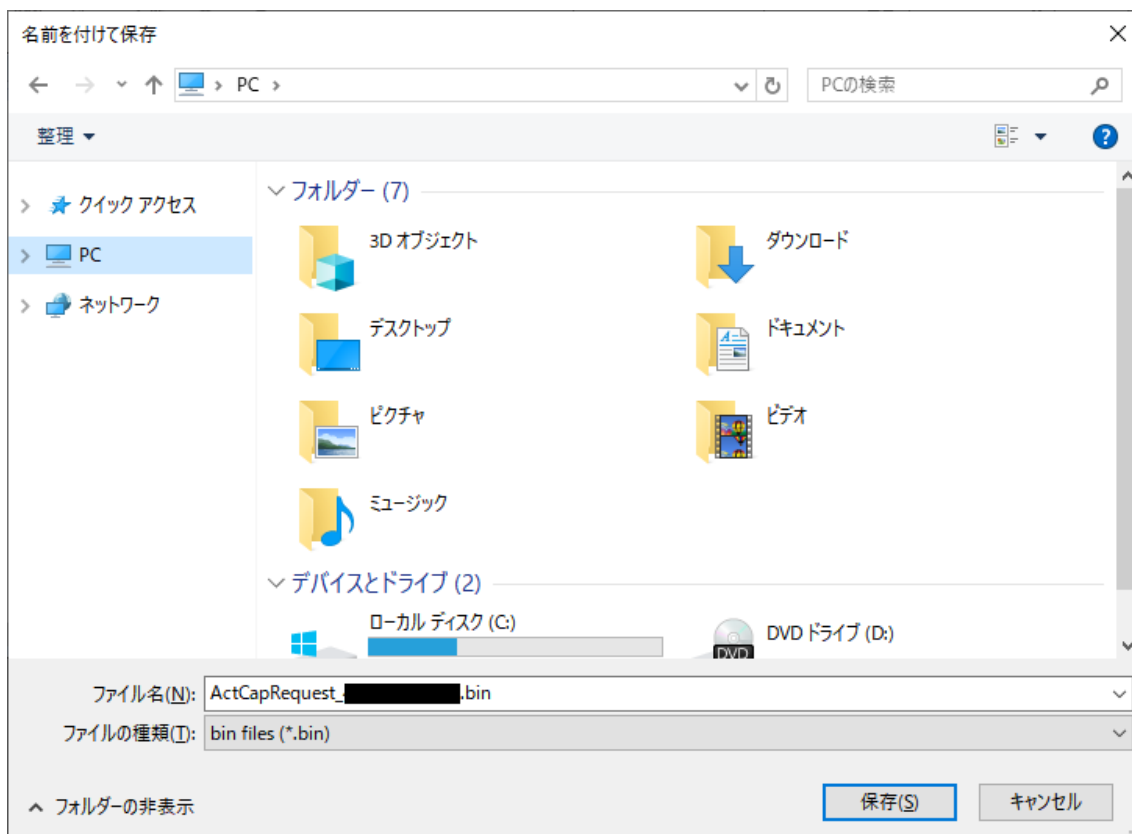

※ ActCapRequest\_xxxxxxx.bin ファイルの保存ができない場合は、パスに日本語を含まないフォルダー配下（例えば、C:ドライブ直下等）に保存をお試しください。

ファイル保存後は、アクティベーションウィンドウ、および Licensing ウィンドウを閉じます。

4. インターネット接続されていないスタンドアローン環境で ActCapRequest\_xxxxxxx.bin ファイルを保存した場合は、USB メモリ等を利用して ActCapRequest\_xxxxxxx.bin ファイルをインターネット接続可能な PC に移します。

5. インターネット接続可能な PC で、Revvity Signals Download Center にログインし、当該の **Product\_Activation** (Activation Code) の右の**今すぐダウンロード**を選択します。

revvity signals

エンタイトルメントを一覧

IMPORTANT NOTICE: Please download and store all versions of our software you may need in the future. After March 25, 2024, all versions with a PerkinElmer brand will no longer be available to download from the Download Center.

エンタイトルメントは下に一覧されています。列見出しをクリックして並べ替えることができます。特定のエンタイトルメントを表示したり、エンタイトルメントに対して処理を実行するには、それらのエンタイトルメントを選択してください。

ChemDraw/ChemOffice Users

Activation Code corresponds to the product in the row they are in

アクティベーションコード 次を含む

エンタイトルメント ID	製品	Quantity_Purchased	開始日	有効期限	メンテナンス	Product_Activation	ダウンロード
<input type="checkbox"/> ORD67012	ChemOffice+ Cloud Std/SNB Bundle. Includes licenses for CD+, CD Collections, HEL.	20	2023/09/21	2024/09/25			<b>今すぐダウンロード</b>
<input type="checkbox"/> ORD67012	ChemDraw Professional. Named User. Subscription, includes Support and Maintenance.	20	2023/09/21	2024/09/25			今すぐダウンロード
<input type="checkbox"/> ORD67012	ChemDraw Prime. Named User. Subscription, includes Support and Maintenance.	20	2023/09/21	2024/09/25			今すぐダウンロード

Revvity Signals Policies Contact Support

Revvity Signals Software, Inc. 2024. All Rights Reserved.

6. **ダウンロード発注**のページに移動します。Offline Device Management をクリックします。

revvity signals

ダウンロード発注

To activate on a computer that is offline, see:

**Offline Device Management**

Product Activation Code: [Redacted]

製品: ChemDraw Professional. Named User. Subscription, includes Support and Maintenance.

新しいバージョン 前のバージョン


バージョン	ダウンロード/パッケージ	最終更新
R-23.0	ChemDraw Professional	2/26/2024

Revvity Signals Policies Contact Support

Revvity Signals Software, Inc. 2024. All Rights Reserved.



7. ファイルの**選択**ボタンをクリックし、保存した ActCapRequest\_xxxxxxx.bin ファイルを指定した後、**送信**ボタンをクリックします。

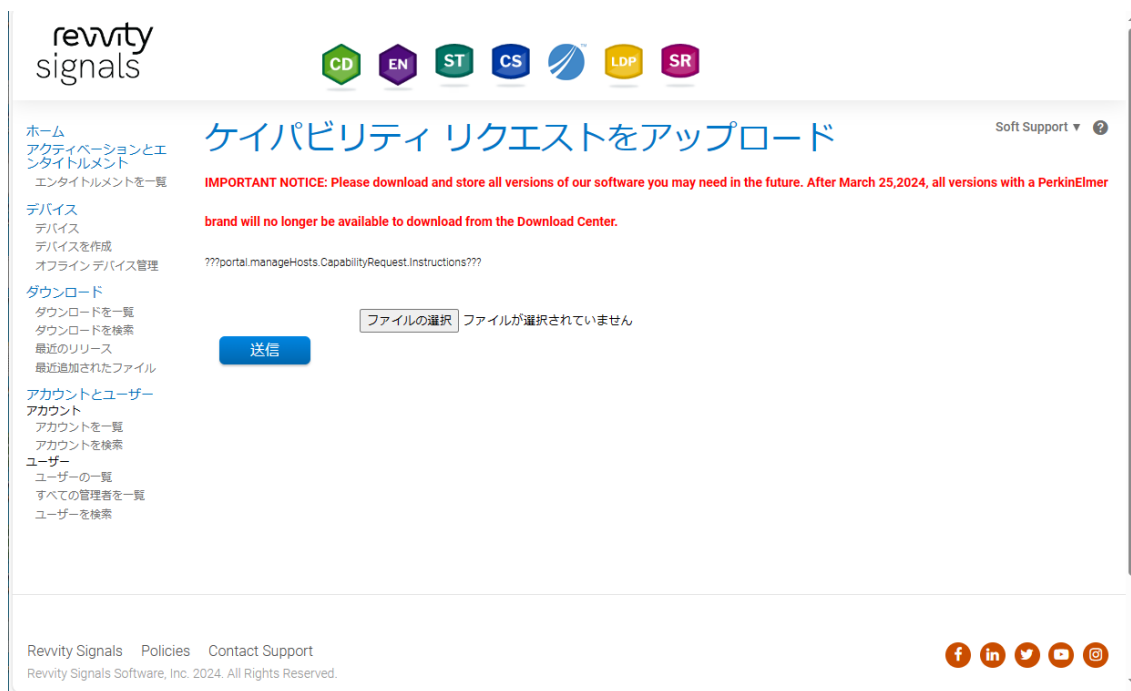

8. 生成された xxxxxxx.bin ファイルが、ダウンロードフォルダー配下に自動でダウンロードされます。


9. ファイルの名前を次のように変更します。

xxxxxxx.bin → Response.bin

10. 本製品を使用したい PC の下記フォルダー配下に、Response.bin ファイルを配置します。

Windows の場合：


C:\ProgramData\RevvitySignalsSoftware\FNE

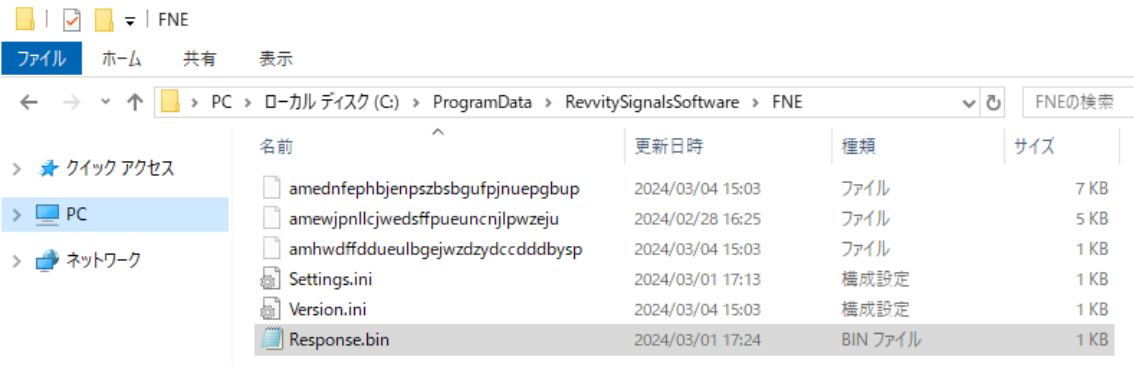

※ ProgramData フォルダーは、隠しファイルになります。

Mac の場合：

ユーザ → 共有 → com.revvity.chemdraw → FNE

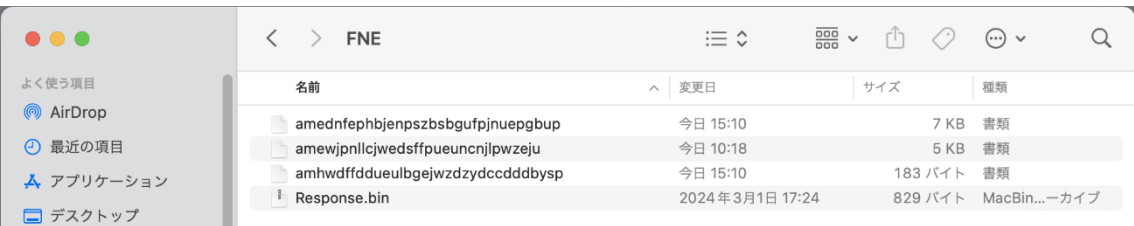

**注意！** バージョンによって、ファイルを配置するフォルダーのパスが異なります。

開発元の社名変更のため、下記一部を伏字（太字斜線部分）にしています。

v22.2

Windows：C:\ProgramData\PerxxxXxxxXXXXXXXXXX\FNE


Mac：ユーザ → 共有 → com.perxxxxxxxx.xxxxxxx.22 → FNE

v22.0 以前（○は該当バージョンの数字）

Windows：C:\ProgramData\PerxxxXxxxXXXXXXXXXX\FNE\○

Mac：ユーザ → 共有 → com.perxxxxxxxx.xxxxxxx.○ → FNE

11. 製品を再起動すると、Licensing ウィンドウが表示されます。ここでも **Activation Code** を選択し、**Continue** をクリックします。

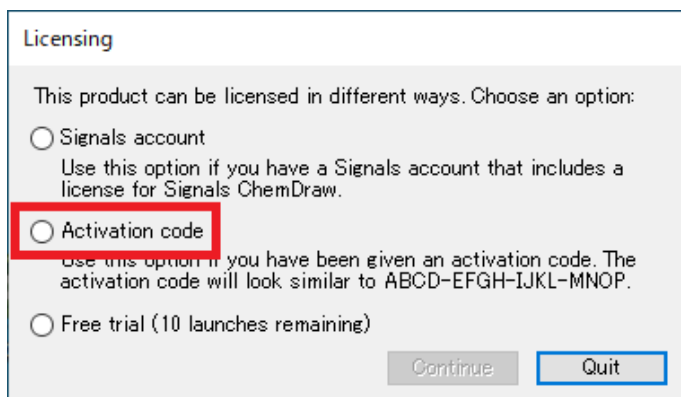

12. FNE フォルダー下の Response.bin ファイルを読み込み、アクティベーションが実行されます。アクティベーションが成功すると、確認メッセージが表示されます。

