

ディアクティベーション方法

- [Signals ChemDraw を購入した場合](#)
- Signals ChemDraw 以外 (ChemDraw Prime、ChemDraw Professional、ChemOffice) を購入した場合
 - [製品からディアクティベーションを行う場合](#)
 - [ファイルのアップロードでディアクティベーションを行う場合](#)


Signals ChemDraw を購入した場合

注意！ ディアクティベーションを実施したい PC は、インターネットに接続可能である必要があります。


注意！ 最後にアクティベーションを実施してから 30 日が経過している場合は、本ディアクティベーションの操作は必要ありません。(製品起動時、Licensing ウィンドウが表示される場合は、これに該当します。)

1. 製品起動後、Licensing ウィンドウを開きます。


Windows の場合：Help → Licensing

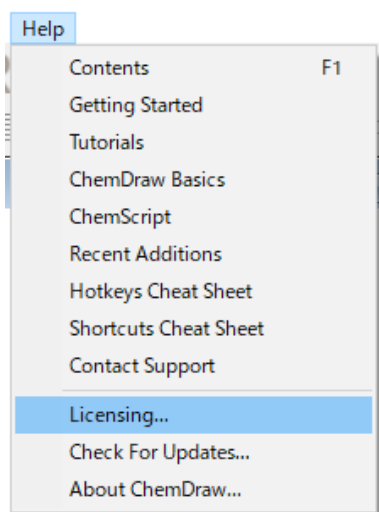

Mac の場合：ChemDraw → Licensing

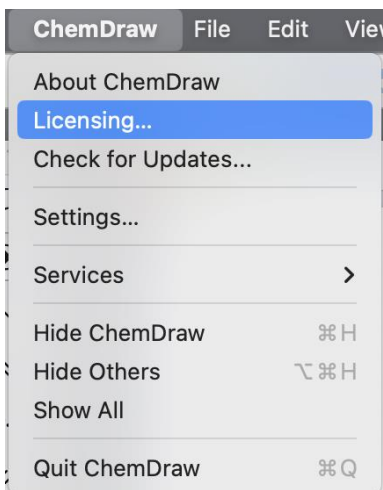

2. Licensing ウィンドウにて、**Sign Out** をクリックして、ディアクティベーションは完了です。

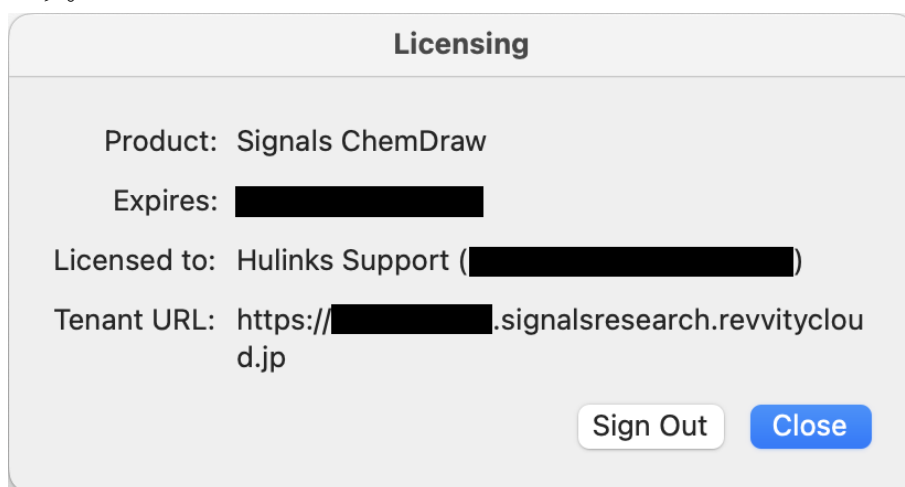


Signals ChemDraw 以外（ChemDraw Prime、ChemDraw Professional、ChemOffice）を購入した場合

製品からディアクティベーションを行う場合


注意！ ディアクティベーションを実施したい PC は、インターネットに接続可能である必要があります。

1. 製品起動後、Licensing ウィンドウを開きます。


Windows の場合：Help → Licensing

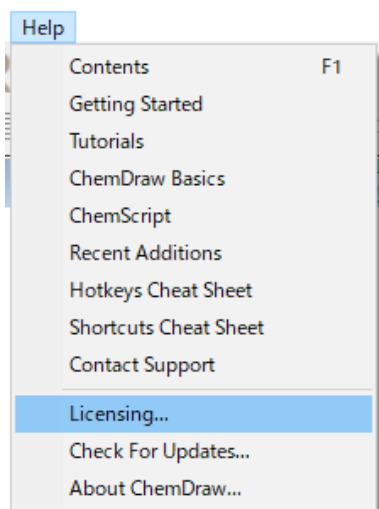

Mac の場合：ChemDraw → Licensing

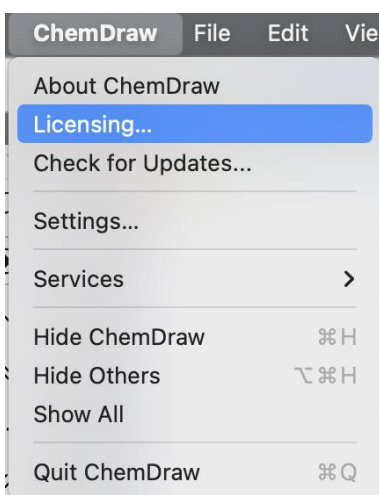


2. アクティベーションウィンドウが表示されます。アクティベーションウィンドウにて、「**Activate or deactivate by uploading a file**」を選択して **Deactivate** ボタンをクリックします。

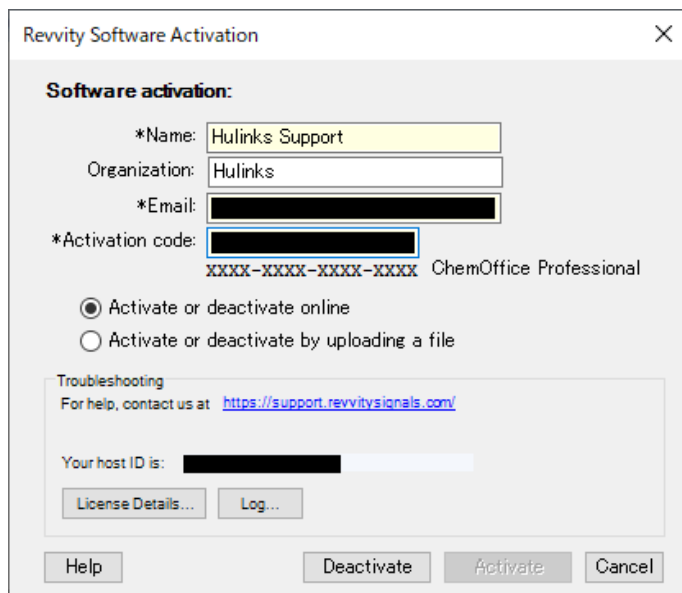


The image shows the 'Revvity Software Activation' dialog box. It has a title bar with a close button (X). The main area is titled 'Software activation:'. It contains several input fields: '*Name:' with 'Hulinks Support', 'Organization:' with 'Hulinks', '*Email:' with a redacted address, and '*Activation code:' with a redacted code. Below these is a placeholder 'XXXX-XXXX-XXXX-XXXX ChemOffice Professional'. There are two radio buttons: 'Activate or deactivate online' (selected) and 'Activate or deactivate by uploading a file'. Below the radio buttons is a 'Troubleshooting' section with the text 'For help, contact us at <https://support.revvitysignals.com/>'. Below that is 'Your host ID is:' followed by a redacted ID. At the bottom are buttons for 'License Details...', 'Log...', 'Help', 'Deactivate', 'Activate', and 'Cancel'.

3. インターネットを通じて、開発元のアクティベーションサーバーにアクセスし、ディアクティベーションが実行されます。ディアクティベーションが成功すると、確認メッセージが表示されます。

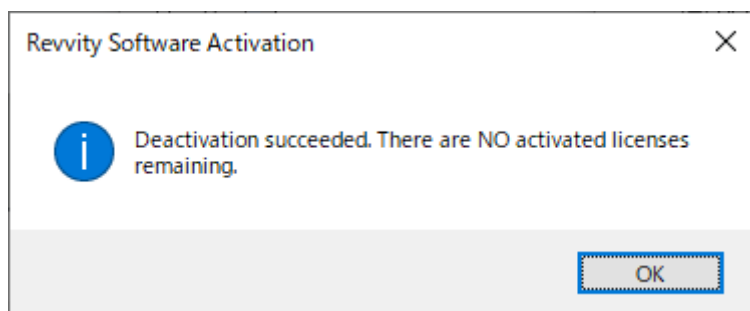

なお、プロキシサーバーやセキュリティソフトによって、アクティベーションサーバーへのアクセスが制限されていると、エラーメッセージが表示されます。

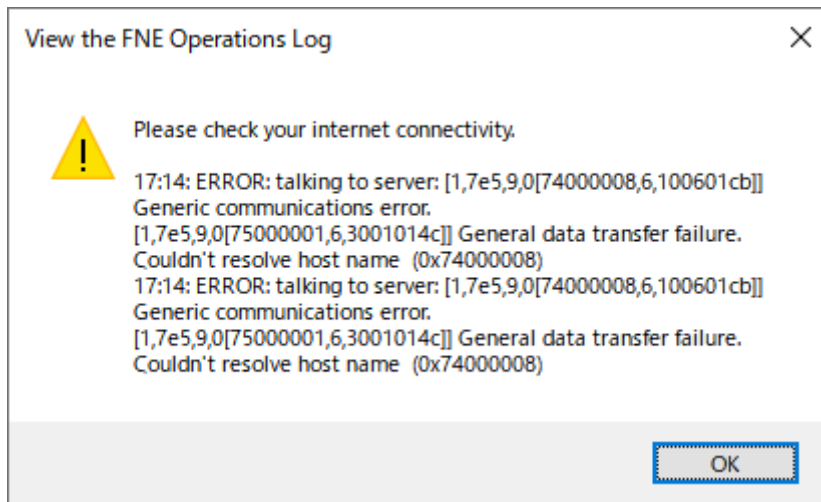


上記エラーメッセージが表示される場合は、ファイルのアップロードでディアクティベーションをお試しください。


ファイルのアップロードでディアクティベーションを行う場合
重要！ 一連の作業は、24 時間以内に完了する必要があります。

1. 製品起動後、Licensing ウィンドウを開きます。


Windows の場合：Help → Licensing

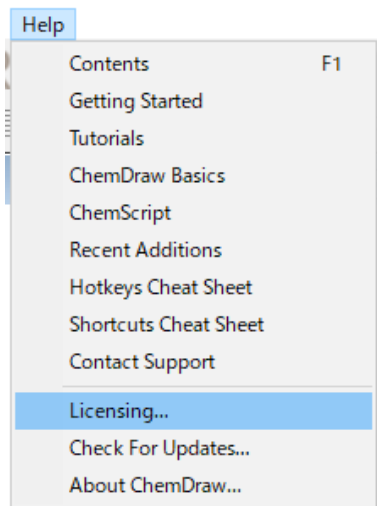

Mac の場合：ChemDraw → Licensing

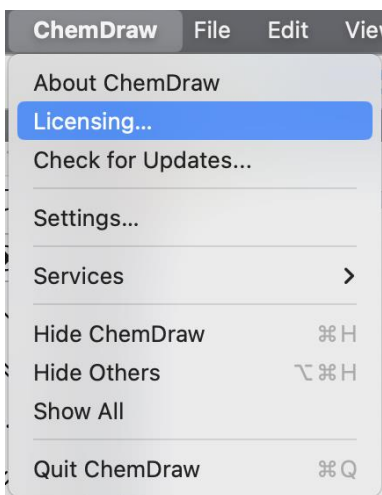


2. アクティベーションウィンドウが表示されます。アクティベーションウィンドウにて、「**Activate or deactivate by uploading a file**」を選択して **Deactivate** ボタンをクリックします。

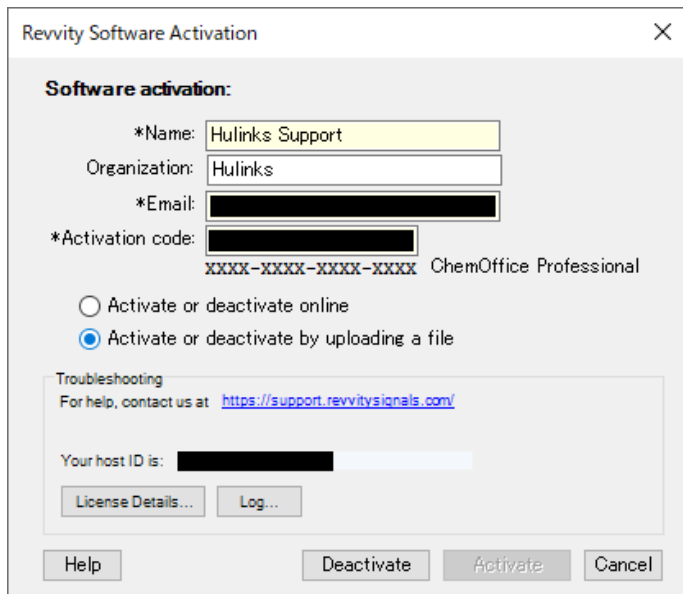

※ v20 以前の場合、左下の **More Options** ボタンをクリックして、展開する必要があります。

3. DeactCapRequest_XXXXX.bin ファイルの保存先を確認するメッセージが表示されます。デスクトップ等を指定してファイルを保存します。

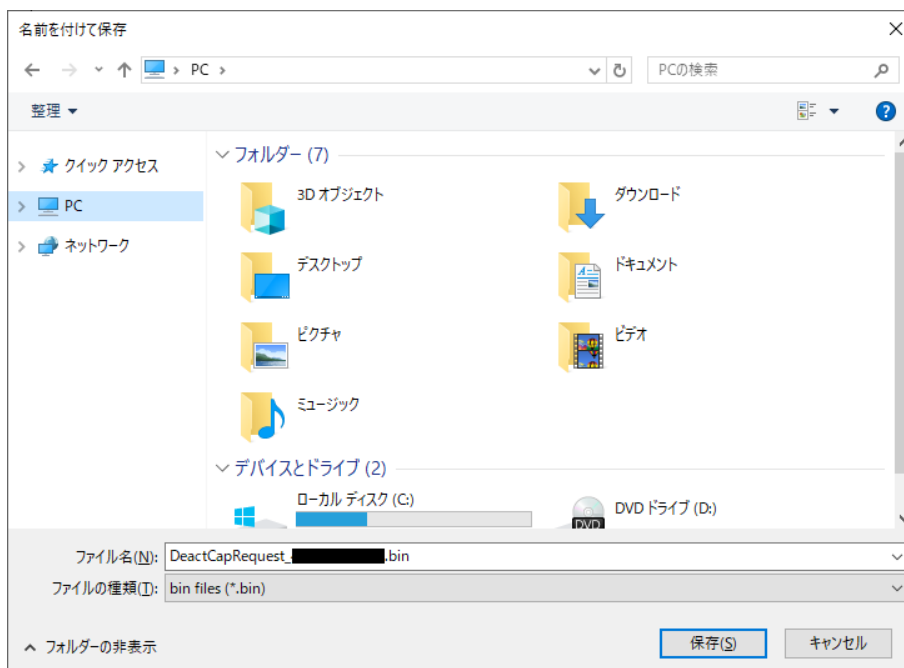

※ DeactCapRequest_XXXXX.bin ファイルの保存ができない場合は、パスに日本語を含

まないフォルダー配下（例えば、C:ドライブ直下等）に保存をお試しください。

ファイル保存後は、アクティベーションウィンドウ、および ChemDraw を閉じます。

- インターネット接続されていないスタンドアローン環境で DeactCapRequest_xxxxx.bin ファイルを保存した場合は、USB メモリ等を利用して DeactCapRequest_xxxxx.bin ファイルをインターネット接続可能な PC に移します。
- インターネット接続可能な PC で、Revvity Signals Download Center にログインし、当該の **Product_Activation** (Activation Code) の右の**今すぐダウンロード**を選択します。

revvity signals

エンタイトルメントを一覧

IMPORTANT NOTICE: Please download and store all versions of our software you may need in the future. After March 25, 2024, all versions with a PerkinElmer brand will no longer be available to download from the Download Center.

エンタイトルメントは下に一覧されています。列見出しをクリックして並べ替えることができます。特定のエンタイトルメントを表示したり、エンタイトルメントに対して処理を実行するには、それらのエンタイトルメントを選択してください。

ChemDraw/ChemOffice Users

Activation Code corresponds to the product in the row they are in

アクティベーション | 次を含む

エンタイトルメント ID	製品	Quantity_Purchased	開始日	有効期限	メンテナンス	Product_Activation	ダウンロード
<input type="checkbox"/> ORD67012	ChemOffice+ Cloud Std/SNB Bundle. Includes licenses for CD+, CD Collections, HEL.	20	2023/09/21	2024/09/25			今すぐダウンロード
<input type="checkbox"/> ORD67012	ChemDraw Professional. Named User. Subscription, includes Support and Maintenance.	20	2023/09/21	2024/09/25			今すぐダウンロード
<input type="checkbox"/> ORD67012	ChemDraw Prime. Named User. Subscription, includes Support and Maintenance.	20	2023/09/21	2024/09/25			今すぐダウンロード

Revvity Signals Policies Contact Support

Revvity Signals Software, Inc. 2024. All Rights Reserved.

6. ダウンロード発注のページに移動します。Offline Device Management をクリックします。

revvity signals

CD EN ST CS LDP SR

ホーム
アクティベーションとエンタイトルメント
エンタイトルメントを一覧

デバイス
デバイス
デバイスを作成
オフライン デバイス管理

ダウンロード
ダウンロードを一覧
ダウンロードを検索
最近のリリース
最近追加されたファイル

アカウントとユーザー
アカウント
アカウントを一覧
アカウントを検索
ユーザー
ユーザーの一覧
すべての管理者を一覧
ユーザーを検索

ダウンロード発注

To activate on a computer that is offline, see:
Offline Device Management

Product Activation Code: [REDACTED]

製品 ChemDraw Professional, Named User, Subscription, includes Support and Maintenance.

新しいバージョン		前のバージョン
バージョン	ダウンロード パッケージ	最終更新
R-23.0	ChemDraw Professional	2/26/2024

Revvity Signals Policies Contact Support
Revvity Signals Software, Inc. 2024. All Rights Reserved.

f in tw y o

7. ファイルの選択ボタンをクリックし、保存した DeactCapRequest_xxxxx.bin ファイルを指定した後、送信ボタンをクリックします。

revvity signals

CD EN ST CS LDP SR

ホーム
アクティベーションとエンタイトルメント
エンタイトルメントを一覧

デバイス
デバイス
デバイスを作成
オフライン デバイス管理

ダウンロード
ダウンロードを一覧
ダウンロードを検索
最近のリリース
最近追加されたファイル

アカウントとユーザー
アカウント
アカウントを一覧
アカウントを検索
ユーザー
ユーザーの一覧
すべての管理者を一覧
ユーザーを検索

ケイパビリティ リクエストをアップロード

IMPORTANT NOTICE: Please download and store all versions of our software you may need in the future. After March 25, 2024, all versions with a PerkinElmer brand will no longer be available to download from the Download Center.

???portal.manageHosts.CapabilityRequest.instructions???

ファイルの選択 ファイルが選択されていません

送信


Revvity Signals Policies Contact Support
Revvity Signals Software, Inc. 2024. All Rights Reserved.

f in tw y o

8. 生成された xxxxxxxx.bin ファイルが、ダウンロードフォルダー配下に自動でダウンロードされます。
9. ファイルの名前を次のように変更します。
xxxxxxx.bin → Response.bin
10. 本製品を使用したい PC の下記フォルダー配下に、Response.bin ファイルを配置します。

Windows の場合：


C:\ProgramData\RevvitySignalsSoftware\FNE

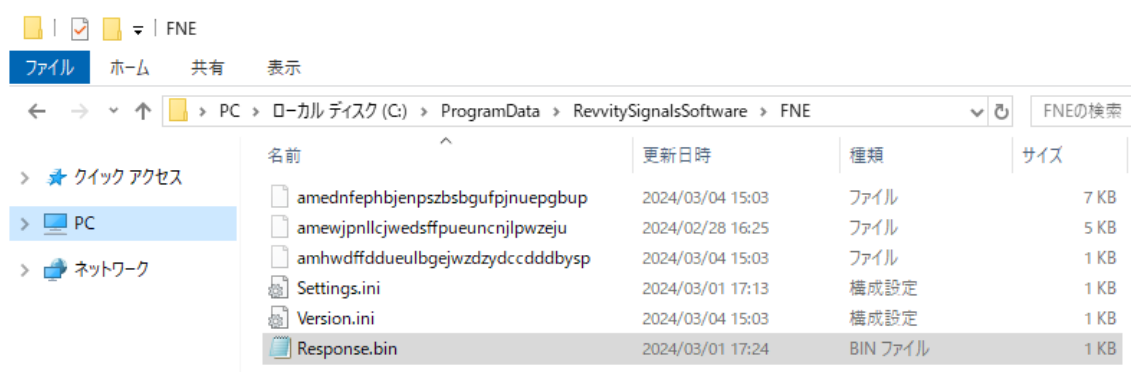

※ ProgramData フォルダーは、隠しファイルになります。

Mac の場合：

ユーザ → 共有 → com.revvity.chemdraw → FNE

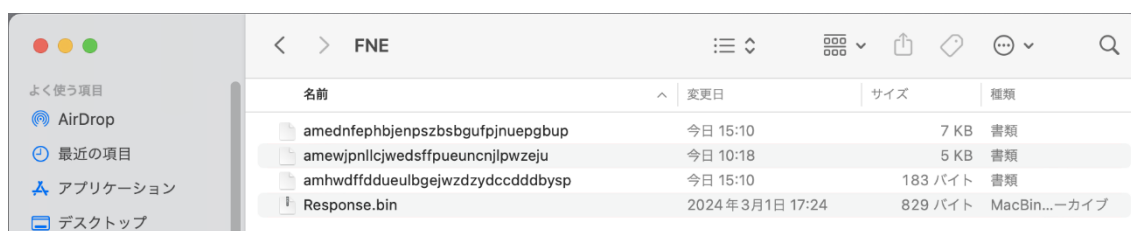

注意！ バージョンによって、ファイルを配置するフォルダーのパスが異なります。

開発元の社名変更のため、下記一部を伏字（太字斜線部分）にしています。

v22.2

Windows：C:\ProgramData\PerxxxXxxxxXxxxxxxxx\FNE


Mac：ユーザ → 共有 → com.perxxxxxxxx.xxxxxxx.22 → FNE

v22.0 以前（○は該当バージョンの数字）

Windows : C:\ProgramData\ **PerxxxXxxxXXXXXXXXXX** \FNE\○

Mac : ユーザ → 共有 → com.**perxxxxxxxx.xxxxxxx**○ → FNE

11. 製品を再起動すると、FNE フォルダー下の Response.bin ファイルを読み込み、ディアクティベーションが実行されます。ディアクティベーションが成功すると、確認メッセージが表示されます。

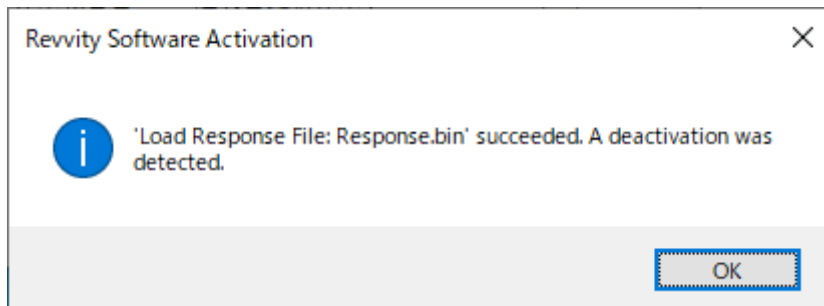

12. 最後に、弊社サポートページの「テクニカルサポートお問い合わせフォーム」より、ディアクティベーションを行いたいマシンの HostID をご連絡ください。