


インストールについて


1. [インストーラーの入手方法](#)
2. インストール方法
 - [Windows 版](#)
 - [Mac 版](#)

インストーラーの入手方法

1. Revvity Signals Download Center (<https://revvitysignals.flexnetoperations.com/>) にログインします。
2. トップページ (エンタイトルメントを一覧) の左のメニューより、ダウンロードを一覧を選択します。

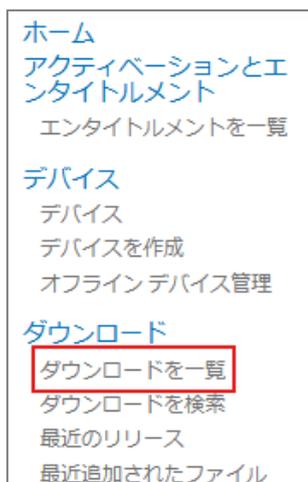

3. Downloads のページに移り、ご自身でご購入した製品を確認することができます。その中から該当の製品名をクリックします。

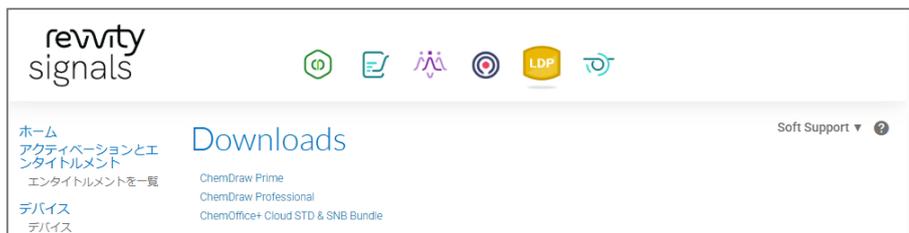

4. **ダウンロード発注**のページに移動します。表示されている Activation Code が正しいことを確認、および記録し、新しいバージョンタブに表示される**製品名**をクリックします。

revvity signals

ダウンロード発注

Soft Support

Product Activation Code: [Redacted]

製品 ChemDraw Professional. Named User. Subscription. Includes Support and Maintenance.

バージョン	ダウンロード パッケージ	最終更新
R-23.0	ChemDraw Professional	2/26/2024

旧バージョンをダウンロードしたい場合には、前のバージョンタブより製品名を選択してください。

5. Windows 版、Mac 版それぞれのインストーラーが用意されているため、ご自身の OS に合わせて、インストーラーをダウンロードしてください。
この時、**ファイル名**のリンクをクリックすると、ダウンロードが始まります。

revvity signals

ダウンロード

Soft Support

ChemDraw Professional 23.0

You may not need to activate!

ファイル

+	ファイルの視覚	ファイルサイズ	追加されたファイル	ファイル名
+	PC Windows Installer for ChemDraw Suite v23	1,260B	2/14/2024	ChemDraw_Suite_23.0.1.exe
+	Mac OSX installer for ChemDraw Professional v23	235,724MB	2/14/2024	cd23.0.1.dmg
+	ChemDraw Product Activation User Guide v23.0	1,268MB	2/22/2024	ChemDraw Product Activation User Guide.pdf
+	ChemDraw Product User Guide v23	52,688MB	2/14/2024	ChemDraw 23.0.1 Product User Guides.zip
+	ChemDraw Suite Release Notes v23	550,714KB	2/14/2024	ChemDraw Suite v23.0 Release Notes.pdf
+	ChemDraw Hardware/Software Guide v23	353,684KB	2/14/2024	DT-23.0 Hardware Software Guide.pdf

また必要に応じて、ここからマニュアル等をダウンロードしてください。


インストール方法

Windows 版


1. 入手したインストーラーを右クリックして、メニューから**管理者として実行**を選択します。




2. 表示されるユーザーアカウント制御ウィンドウにて、**はい**をクリックします。

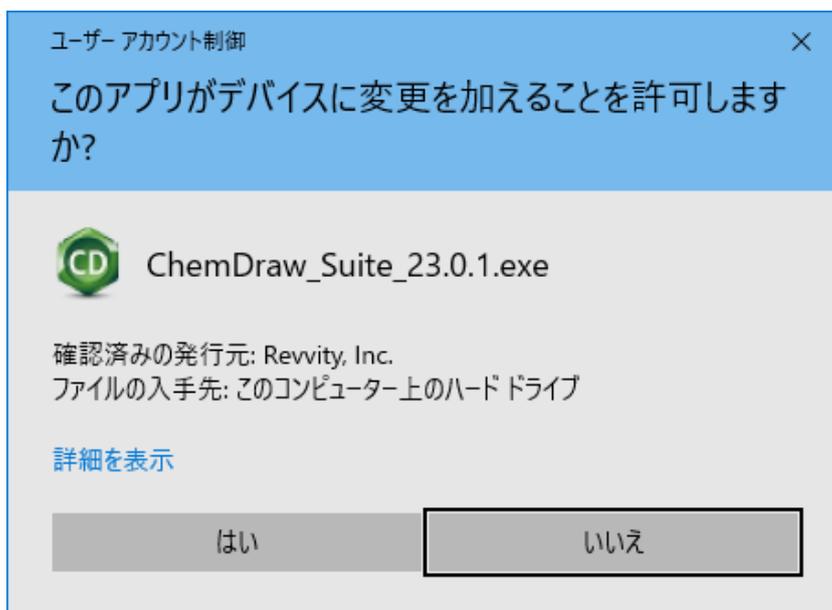


3. 解凍先のパスが示されます。デフォルトのまま **OK** をクリックします。

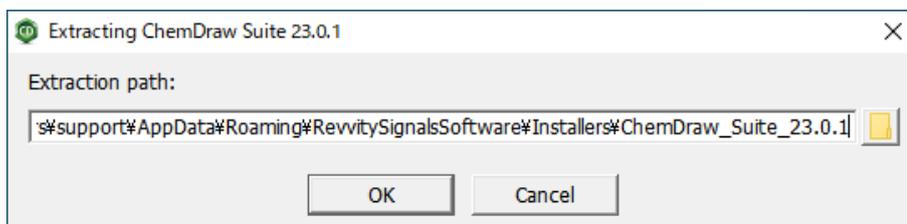


プログラムの解凍が終わるまで、少々お待ちください。

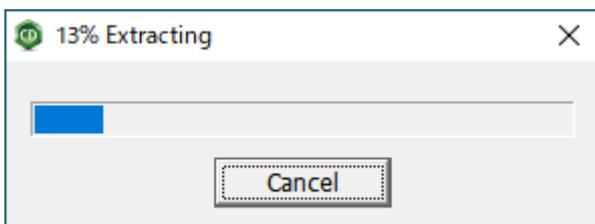


4. アクティベーションダイアログについての注意事項が表示されます。**OK** をクリックします。

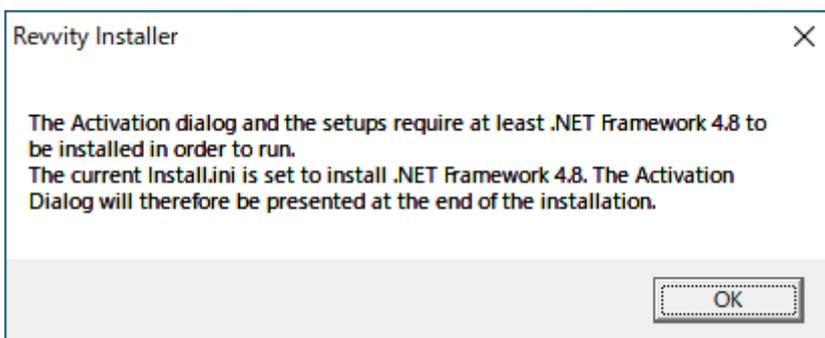

5. ChemDraw Suite 23.0.1 Installer ウィンドウと共に、アクティベーションのための Licensing ウィンドウが表示されます。
6. ここでは Licensing ウィンドウで **Quit** を選択し、アクティベーション操作をスキップします。

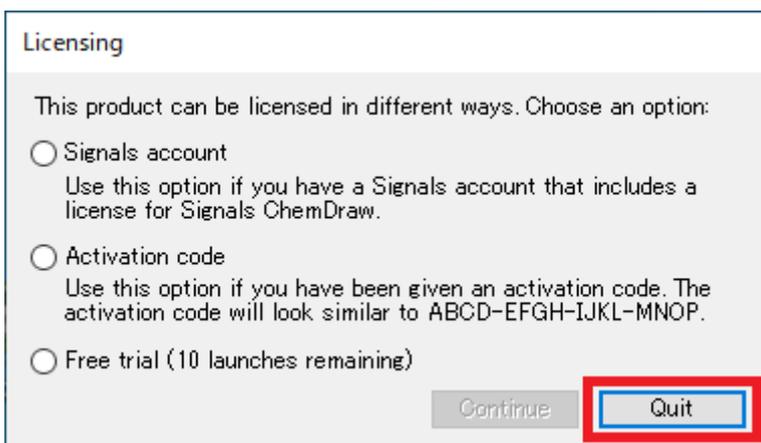


7. ChemDraw Suite 23.0.1 Installer ウィンドウにて、**Next** を選択します。
この際、旧バージョンの製品がインストールされている場合は、旧バージョンのアンインストールが催促されます。製品のインストールには旧バージョンのアンインストールが必要なため、催促に従ってアンインストールを実行してください。

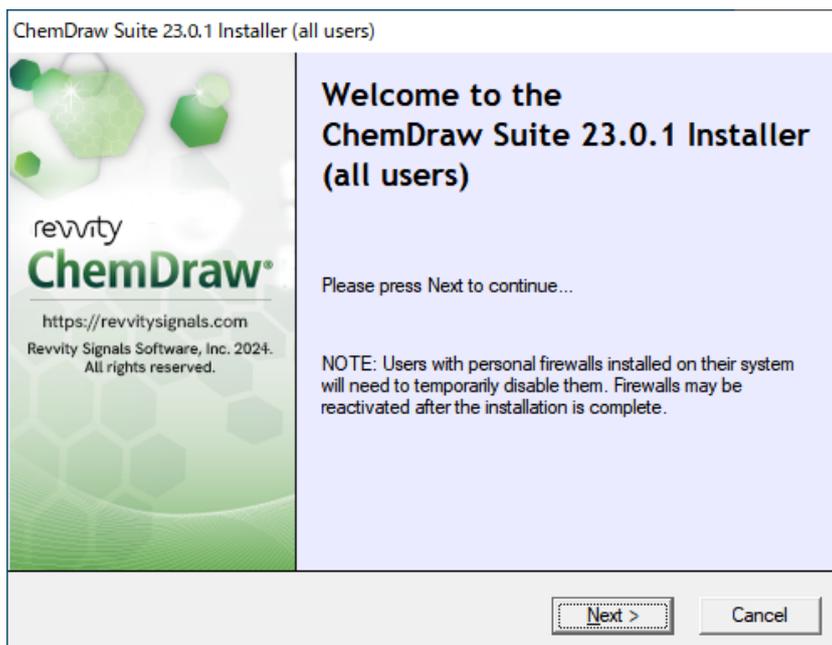


8. 使用許諾が表示されます。ライセンス条項をスクロールして内容を最後まで確認し、承認する場合は「I accept the terms in this license agreement」にチェックを入れ、**Next**をクリックします。



9. インストール先のフォルダーを選択し、**Next** をクリックします。この際、インストール先のフォルダーは Default で問題ありません。

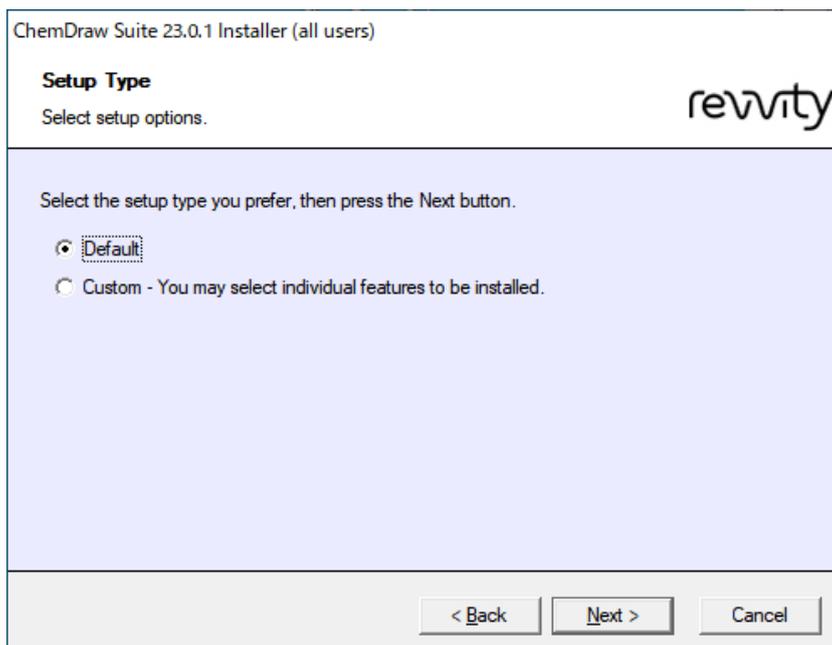


10. 使用したいアプリケーションにチェックを入れて、**Next** をクリックします。いずれも使用予定がない場合は、すべてのチェックを外して Next をクリックします。
- ※ ChemDraw Suite 32-bit にのみ、ChemFinder が含まれます。
 - ※ ChemDraw Collections は、Signals ChemDraw で使用可能な機能です。
 - ※ ChemScript は、ChemDraw Professional 以上で使用可能な機能です。

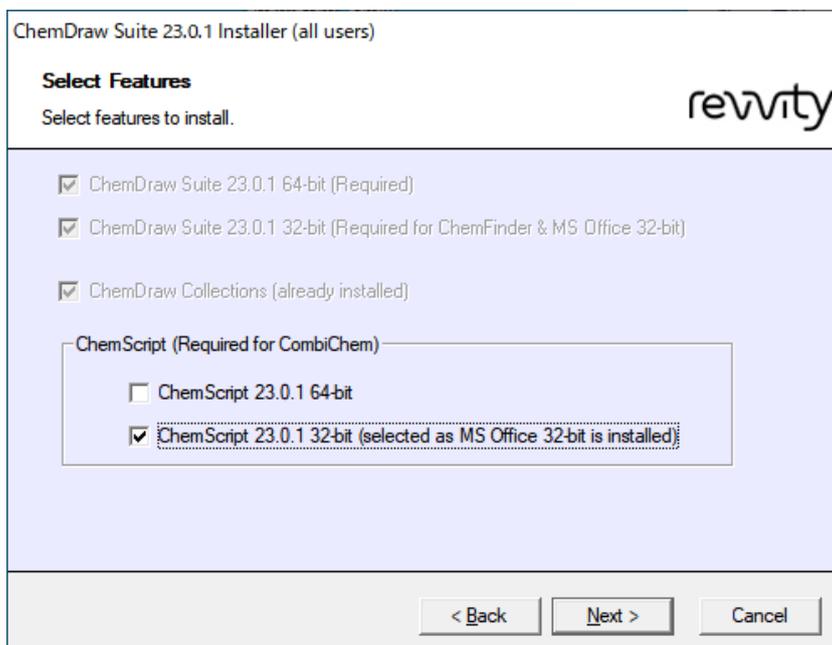


11. ChemFinder Ultra や ChemScript で Python を使用したい場合は、いずれかにチェック

を入れ、**Next** をクリックします。使用予定がない場合は、チェックを外して Next をクリックします。

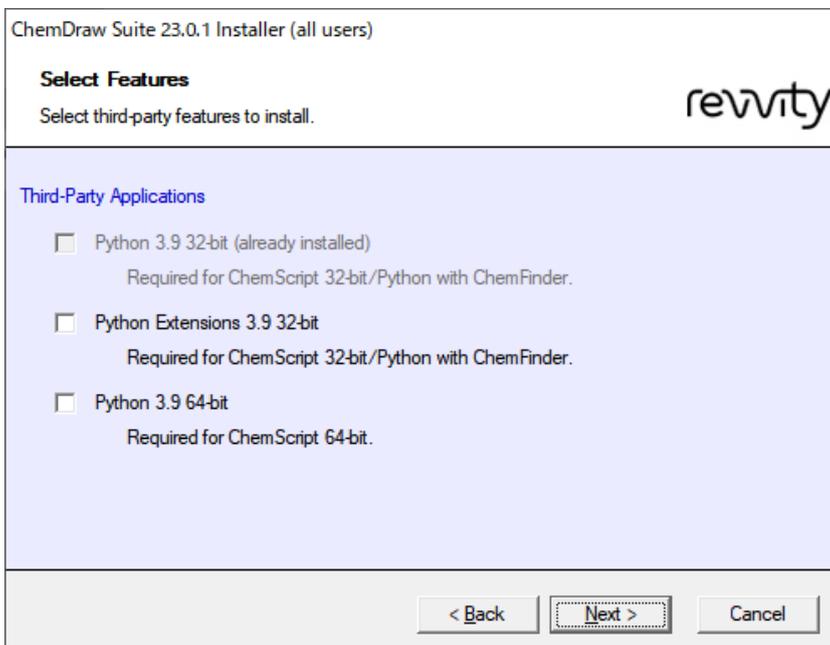

12. **Install** ボタンをクリックします。

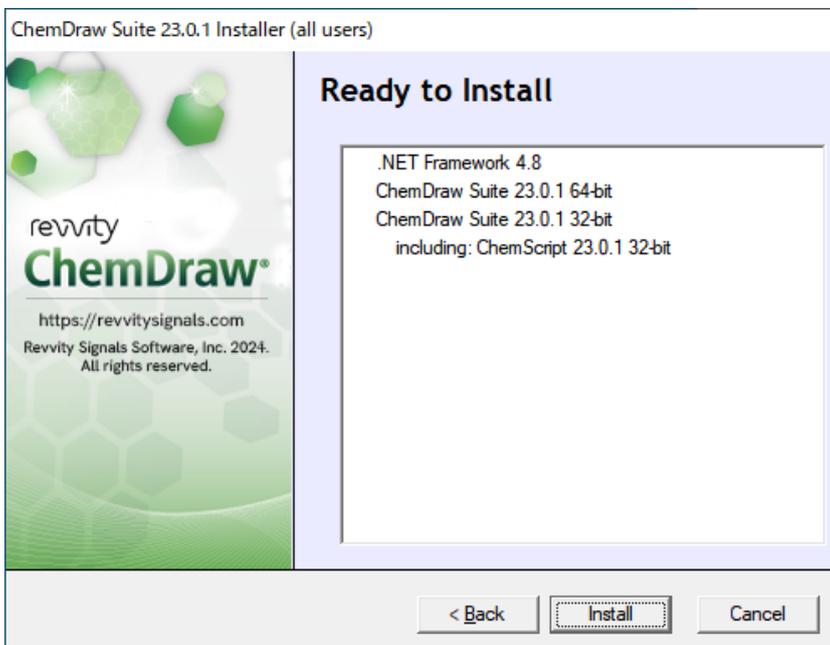

プログラムが順にインストールされ、インストールが完了します。

Mac 版


1. 入手したインストーラーをダブルクリックします。




2. 使用許諾が表示されます。ライセンス条項をスクロールして内容を最後まで確認し、承認する場合は **Agree** をクリックします。




プログラムの解凍が終わるまで、少々お待ちください。

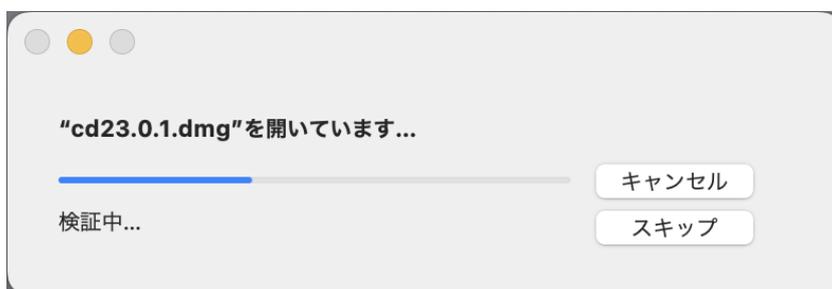

3. オープニングウィンドウが表示されます。
ChemDraw のアイコンを **Applications** フォルダーへドラッグ&ドロップします。
※ ChemDraw Collections は、Signals ChemDraw で使用可能な機能です。

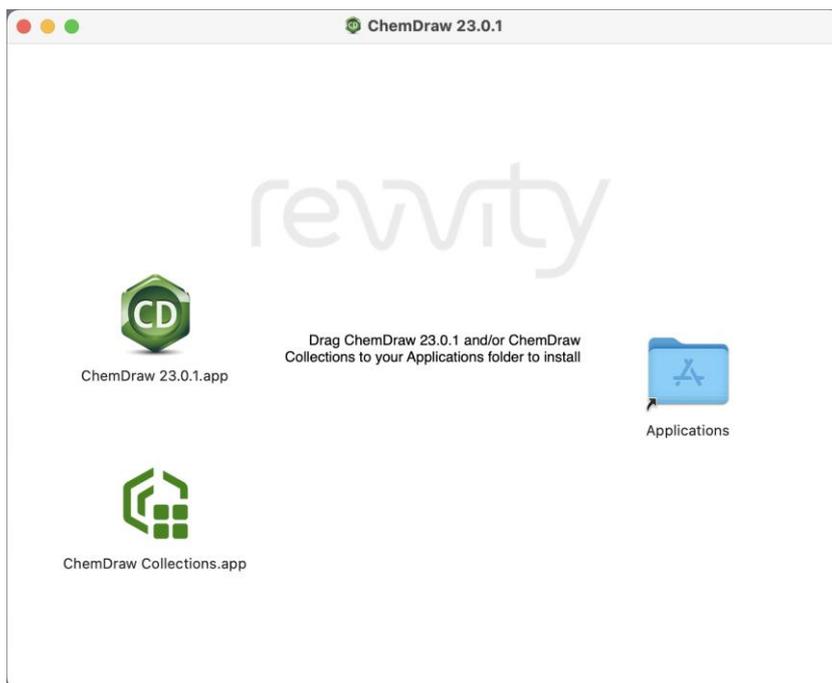

4. Applications フォルダーから ChemDraw を起動すると、アクティベーションのための Licensing ウィンドウが表示されます。弊社サポートページの「アクティベーション方法」を参照し、アクティベーションを実行します。

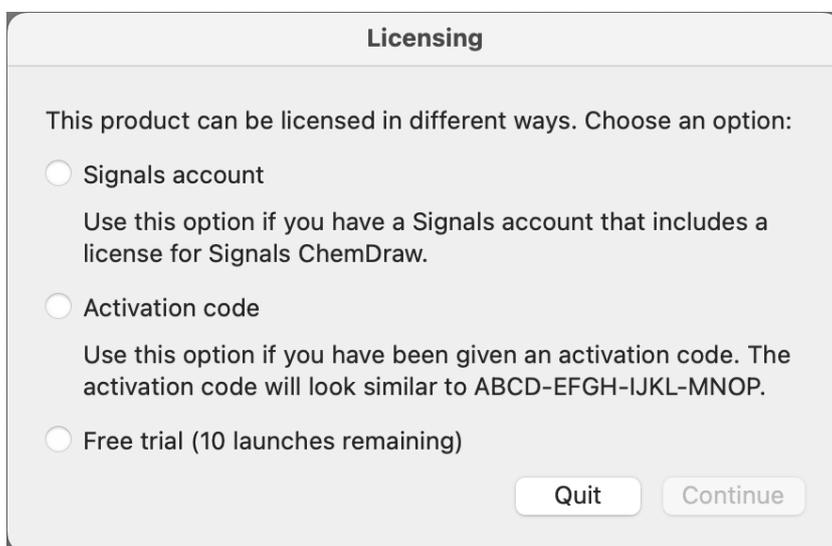

5. インストールウィンドウが表示されます。**Install** ボタンをクリックして、インストールは完了です。

Installation

ChemDraw will create folders in this path, where you can put your files and personalized templates, stationery, samples, scripts, nicknames, etc.

support > Library > Application Support > com.revivity.ChemDraw

You can also choose a custom location for the ChemDraw configuration.

Choose Custom Location...

Clear Custom Location

Cancel

Install