


インストールについて


1. [各種インストーラーの入手方法](#)
2. インストール方法
 - ChemDraw のインストール
 - [Windows 版](#)
 - [Mac 版](#)
 - [追加アプリケーション \(ChemDraw for Excel、Chem3D、ChemFinder、ChemFinder for Office、Chemscript\) のインストール](#)

各種インストーラーの入手方法

1. Revvity Signals Download Center (<https://revvitysignals.flexnetoperations.com/>) にログインします。
2. トップページ(エンタイトルメントを一覧)の左のメニューより、[ダウンロードを一覧]を選択します。

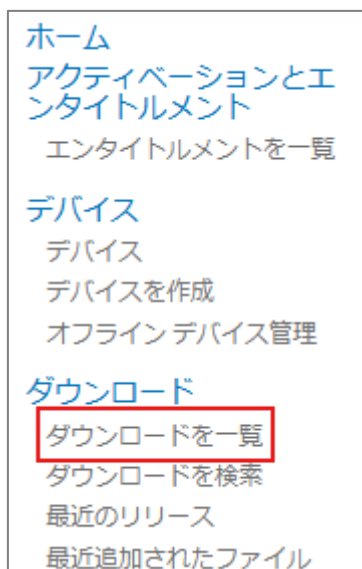


3. Downloads のページに移り、ご自身でご購入した製品を確認することができます。
その中から該当の製品名をクリックします。

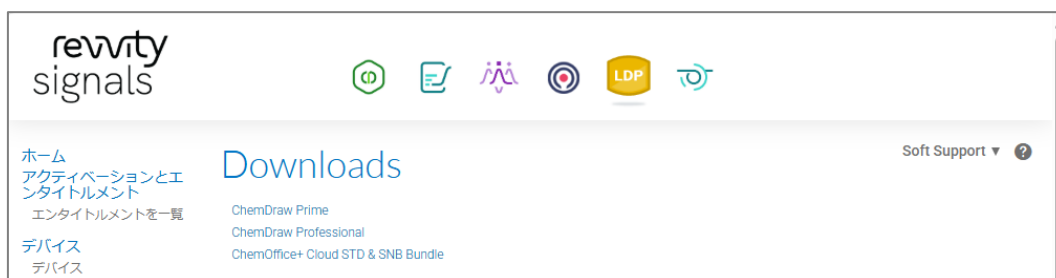

4. ダウンロードパッケージのページに移動します。

新しいバージョンタブに表示されている**[製品名]**をクリックします。

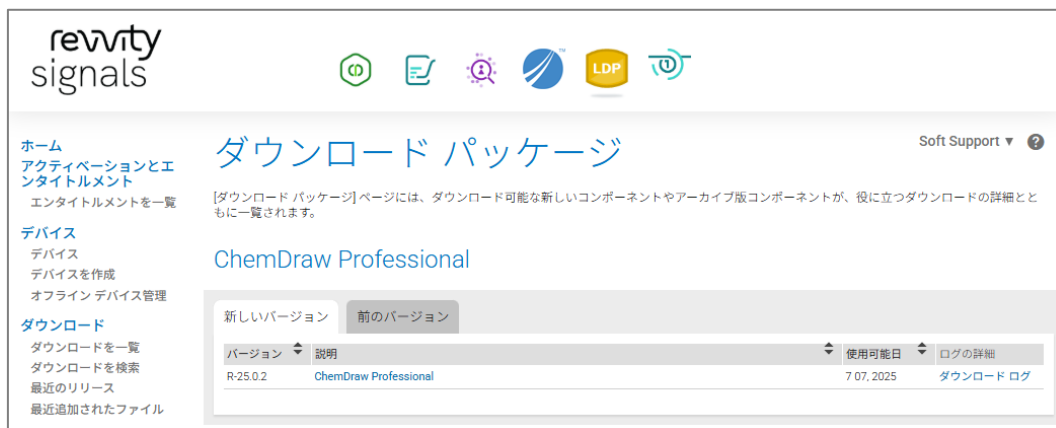

旧バージョンをダウンロードしたい場合には、前のバージョンタブより製品名を選択してください。

5. 各種インストーラーがダウンロード可能なため、状況に合わせて**[ファイル名]**をクリックして、インストーラーをダウンロードください。

ChemDraw (Windows 版) をインストールしたい場合：

ChemDraw_25.0.2.exe (**ChemDraw_Prime_25.0.2.exe**) をクリックしてください。

ChemDraw (Mac 版) をインストールしたい場合：

cd25.0.2.dmg (**cdPRI25.0.2.dmg**) をクリックしてください。

追加アプリケーション (ChemDraw for Excel、Chem3D、ChemFinder、ChemFinder for Office、ChemScript) をダウンロードしたい場合：

ChemDraw_Applications_25.0.2.exe をクリックしてください。

注意！ 追加アプリケーションは、ChemDraw Professional 以上で利用可能です。

注意！ 追加アプリケーションは、Windows でのみ利用可能です。

ホーム

アクティベーションとエンタitlementメント

エンタitlementメントを一覧

デバイス

デバイス

デバイスを作成

オフライン デバイス管理

ダウンロード

ダウンロードを一覧

ダウンロードを検索

最近のリリース

最近追加されたファイル

アカウントとユーザー

アカウント

アカウントを一覧

アカウントを検索

ユーザー

ユーザーの一覧

すべての管理者を一覧

ユーザーを検索

ダウンロード

ChemDraw Professional 25.0.2

Learn more about our [ChemDraw Suite Of Products](#)

You may not need to activate!

If prompted for an activation code, please do the following:

- Click [here](#) to navigate back to the List Entitlement page and Copy the Product Activation code.
- This Product Activation code will activate both WIN & MAC platforms.

ファイル

7 ファイル

+	ファイルの説明	ファイル サイズ	追加されたファイル	ファイル名
+	CHEMDRAW DESKTOP INSTALL FIRST - PC Windows Installer for ChemDraw Professional v25.0.2	387.94MB	7 07, 2025	ChemDraw_25.0.2.exe
+	ChemDraw Applications v25.0.2 - INSTALL AFTER CHEMDRAW DESKTOP	771.47MB	7 07, 2025	ChemDraw_Applications_25.0.2.exe
+	Mac OSX Installer for ChemDraw Professional v25.0.2	105.04MB	7 07, 2025	cd25.0.2.dmg
+	ChemDraw Product Activation User Guide v25.0	930.11KB	6 17, 2025	ChemDraw Product Activation User Guide v25.pdf
+	ChemDraw Product User Guide v25.0	52.7MB	6 02, 2025	ChemDraw 25.0.0 Product User Guides.zip
+	ChemDraw Release Notes v25.0	459.38KB	6 02, 2025	ChemDraw v25.0 Release Notes.pdf
+	ChemDraw Hardware/Software Guide v25.0	197.6KB	6 02, 2025	ChemDraw v25.0 Hardware Software Guide.pdf

Soft Support ▼ ?


また必要に応じて、ここからマニュアル等をダウンロードしてください。

インストール方法


ChemDraw のインストール

Windows 版


1. 入手したインストーラーを右クリックして、メニューから**[管理者として実行]**を選択します。
2. インストールファイルの解凍先のパスが表示されます。
デフォルトの設定のまま**[OK]**を選択します。

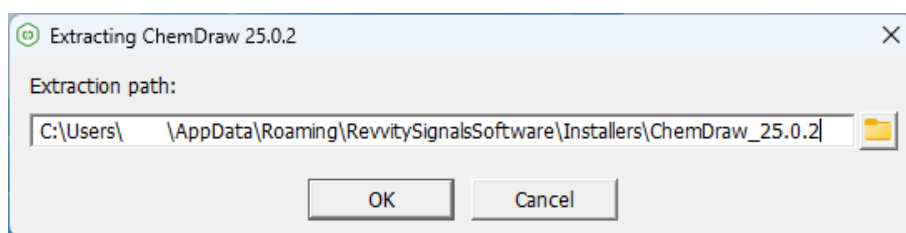

3. 表示されるユーザーアカウント制御ウィンドウにて、**[はい]**を選択します。

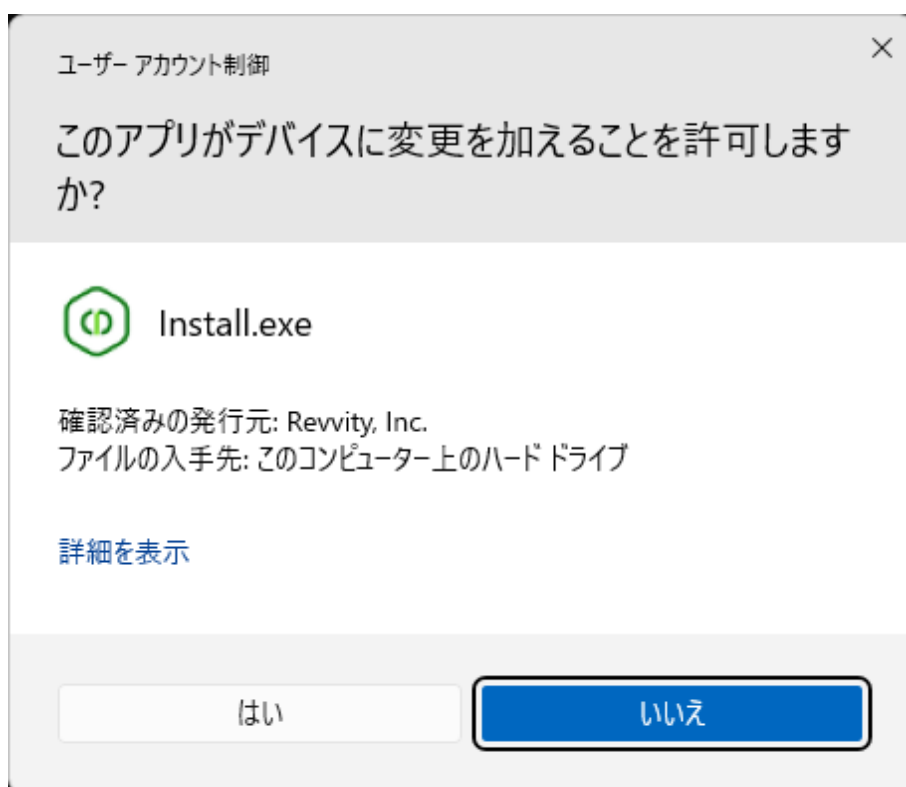

4. ChemDraw 25.0.2 Installer ウィンドウにて、[Next]を選択します。

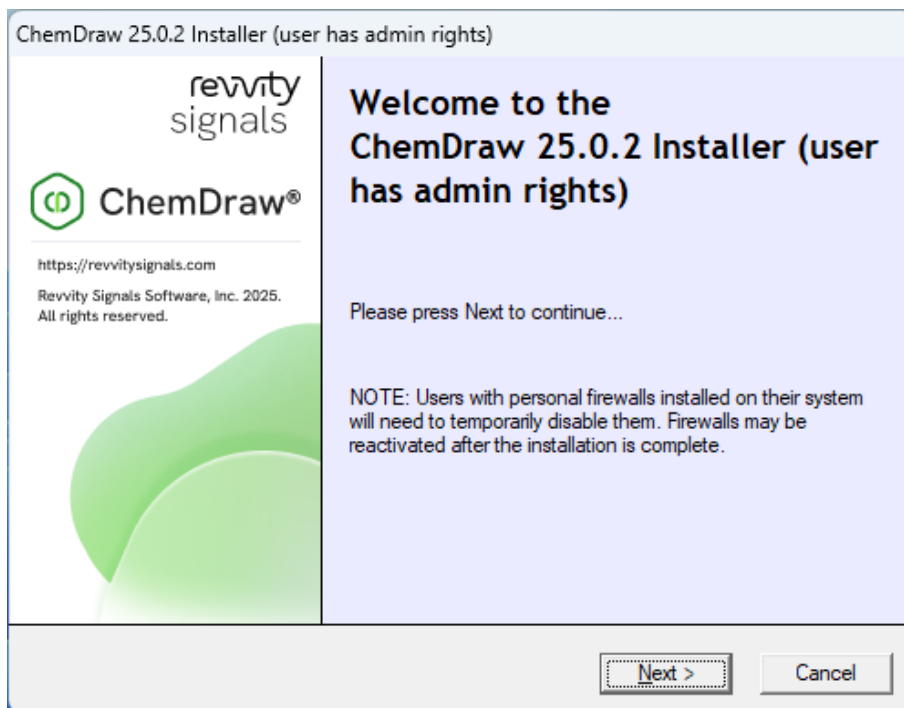


なお、旧バージョンの ChemDraw がインストールされている場合は、旧バージョンのアンインストールが催促されます。
催促に従ってアンインストールを実行してください。

5. 使用許諾が表示されます。


内容を確認の上、**[I accept the terms in this license agreement]**にチェックを入れ、**[Next]**をクリックします。



6. 運用状況に合わせてインストールのタイプを選択し、**[Next]**をクリックします。

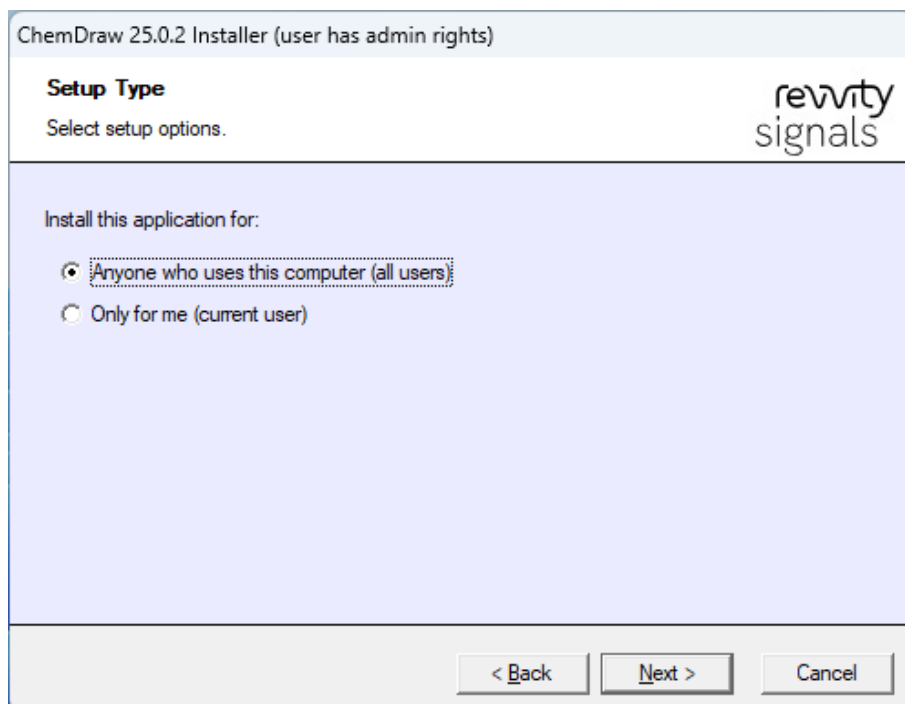


7. **[Next]**をクリックします。

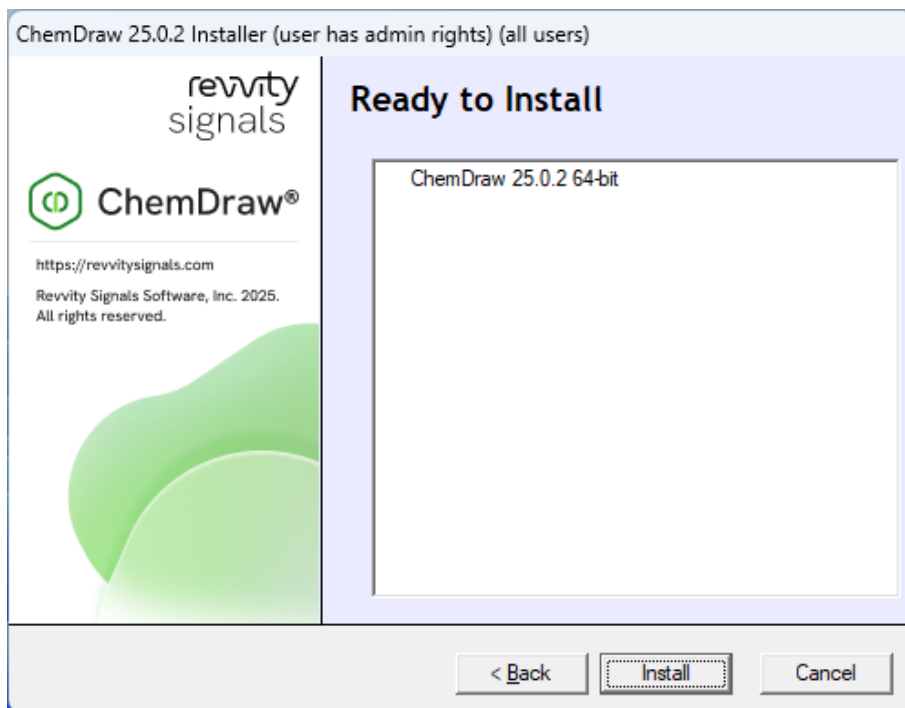


8. **[Install]**をクリックします。

インストール完了後は**[Finish]**をクリックして、インストーラーを終了してください。

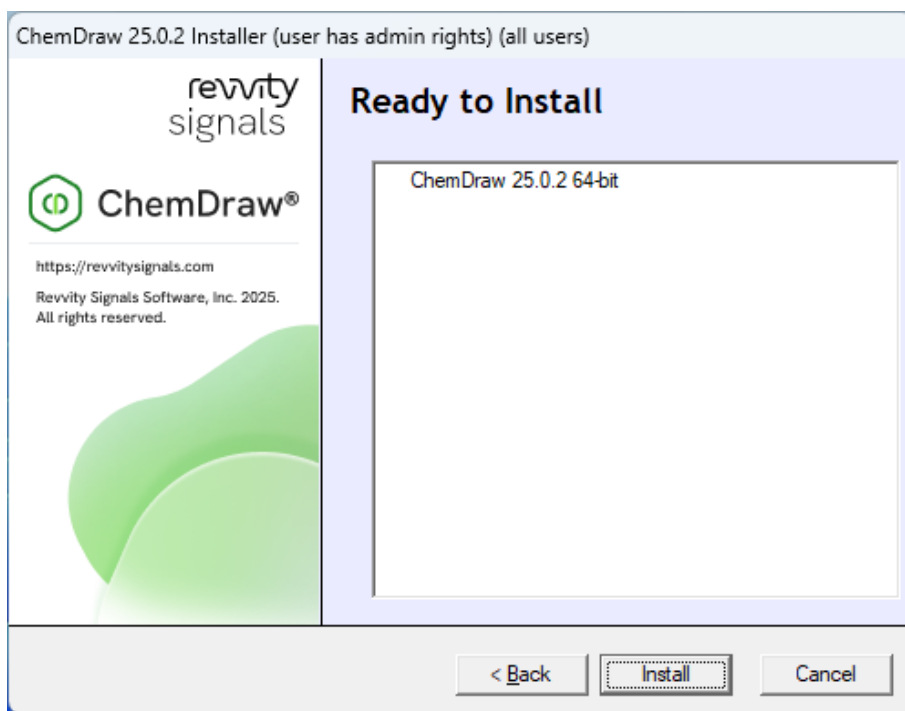

↓

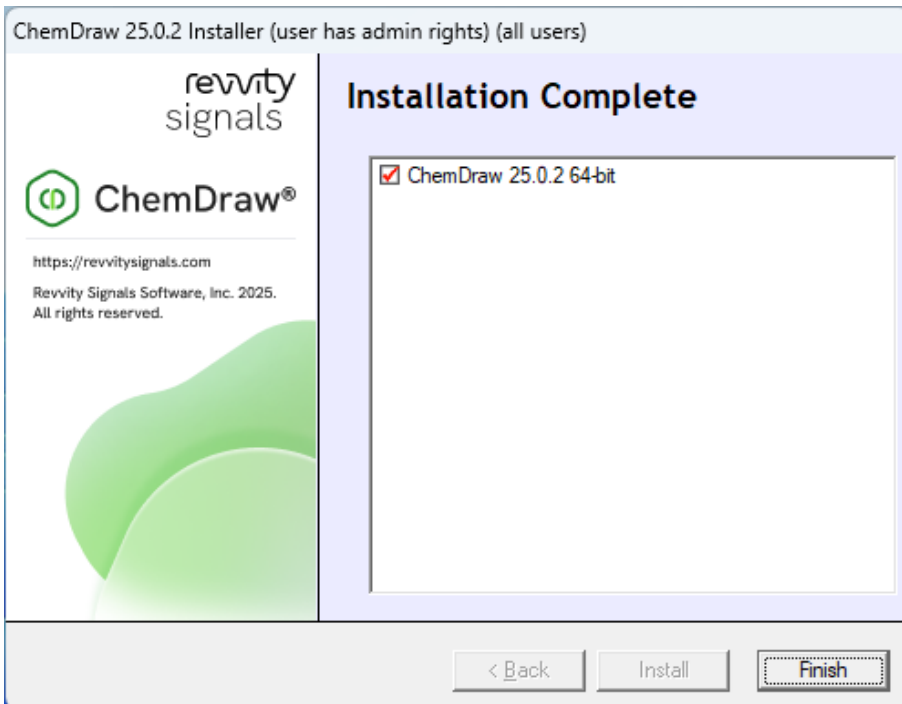


Mac 版

1. 入手したインストーラーをダブルクリックします。

2. 使用許諾が表示されます。

内容を確認の上、[Agree]をクリックします。

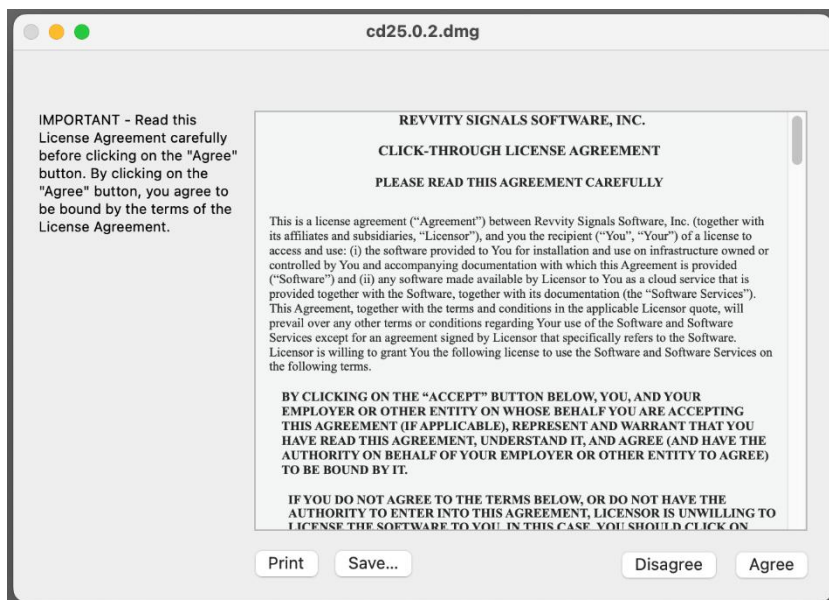

3. ChemDraw のアイコンを[Applications]フォルダーへドラッグ&ドロップして、インストールが完了します。




追加アプリケーション（ChemDraw for Excel、Chem3D、ChemFinder、ChemFinder for Office、Chemscript）のインストール

注意！ 追加アプリケーションは、ChemDraw Professional 以上で利用可能です。


注意！ 追加アプリケーションは、Windows 版でのみ利用可能です。

注意！ 事前に、ChemDraw をインストールしておく必要があります。


1. 入手したインストーラーを右クリックして、メニューから**管理者として実行**を選択します。
2. インストールファイルの解凍先のパスが表示されます。
デフォルトの設定のまま**[OK]**を選択します。

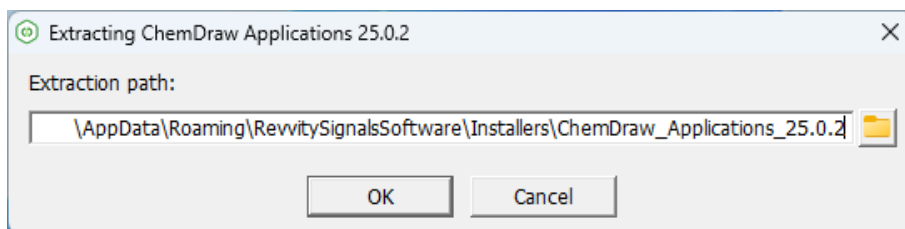

3. 表示されるユーザーアカウント制御ウィンドウにて、**[はい]**を選択します。

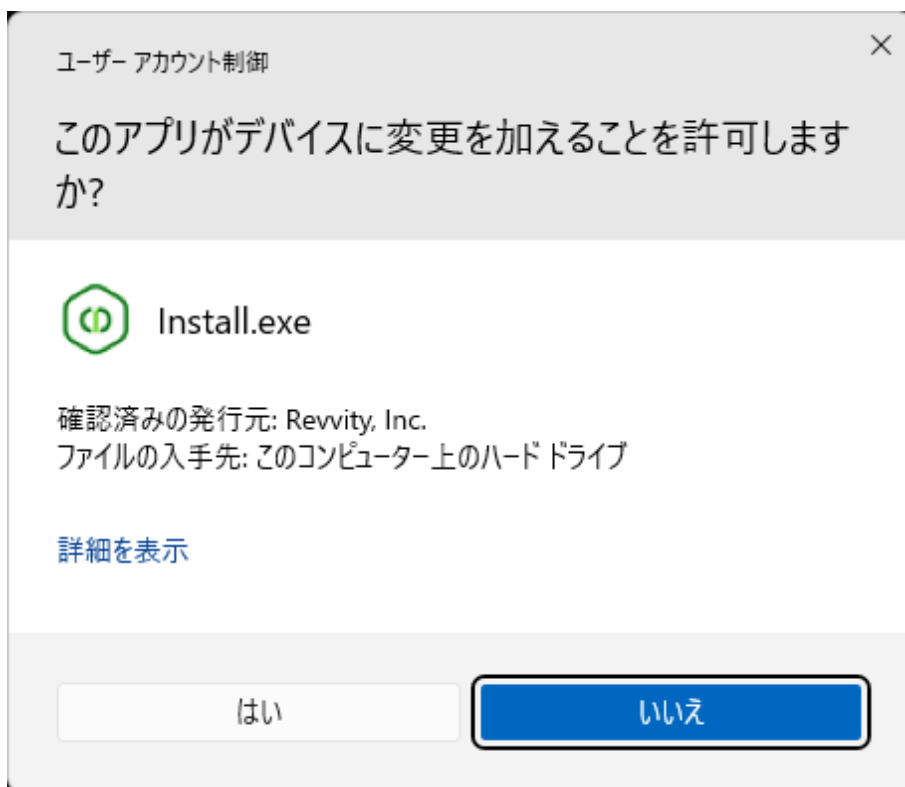


4. ChemDraw Applications 25.0.2 Installer ウィンドウにて、[Next]を選択します。

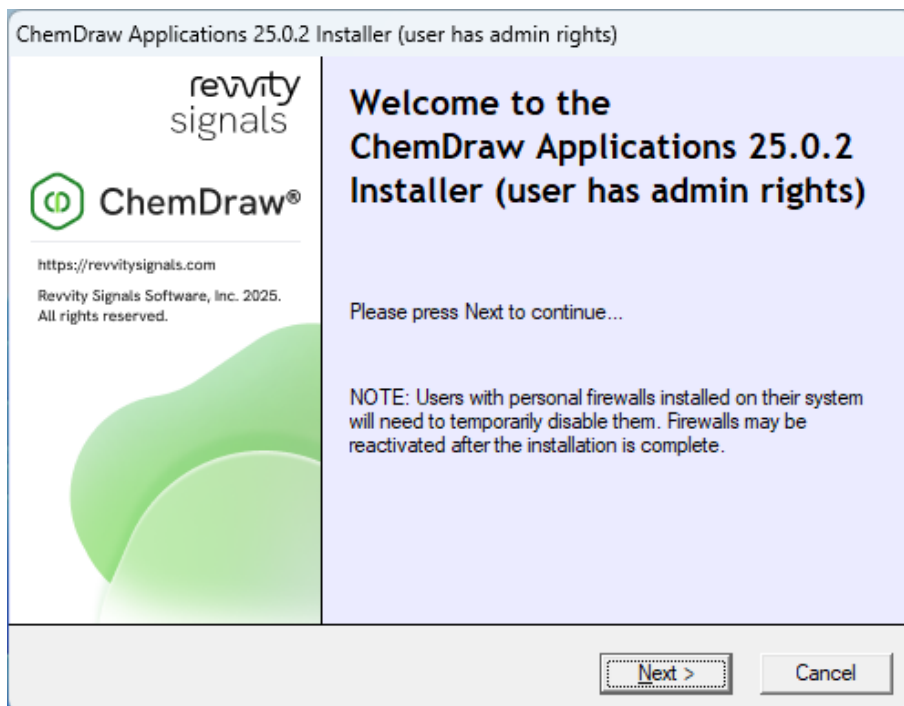


5. 使用許諾が表示されます。
内容を確認の上、[I accept the terms in this license agreement]にチェックを入れ、[Next]をクリックします。



6. 運用状況に合わせてインストールのタイプを選択し、[Next]をクリックします。

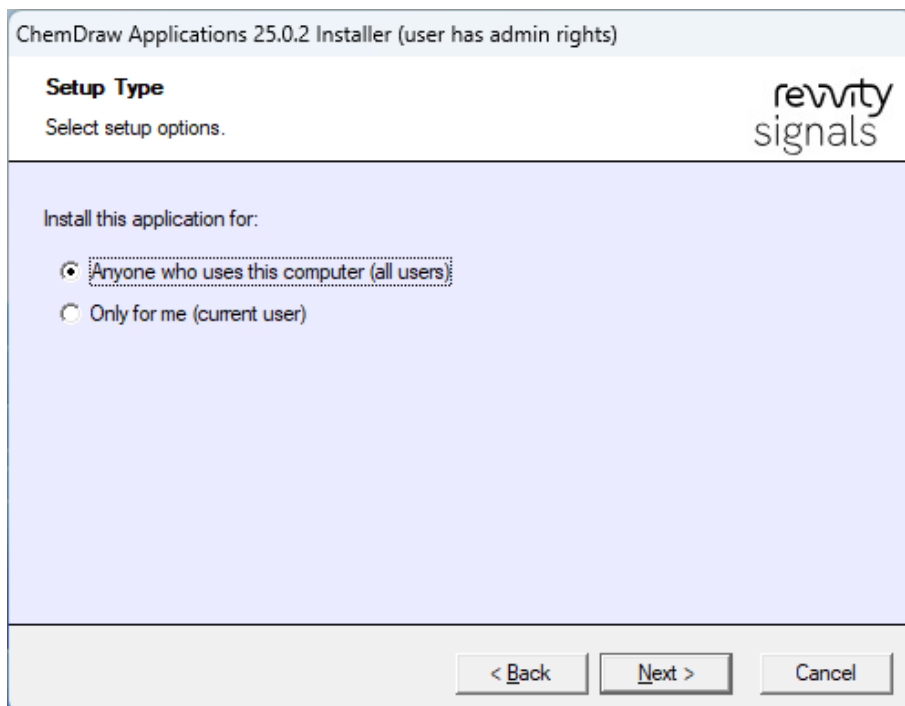


7. ChemScript を使用したい場合は、32-bit/64-bit いずれかにチェックを入れ、[Next]をクリックします。

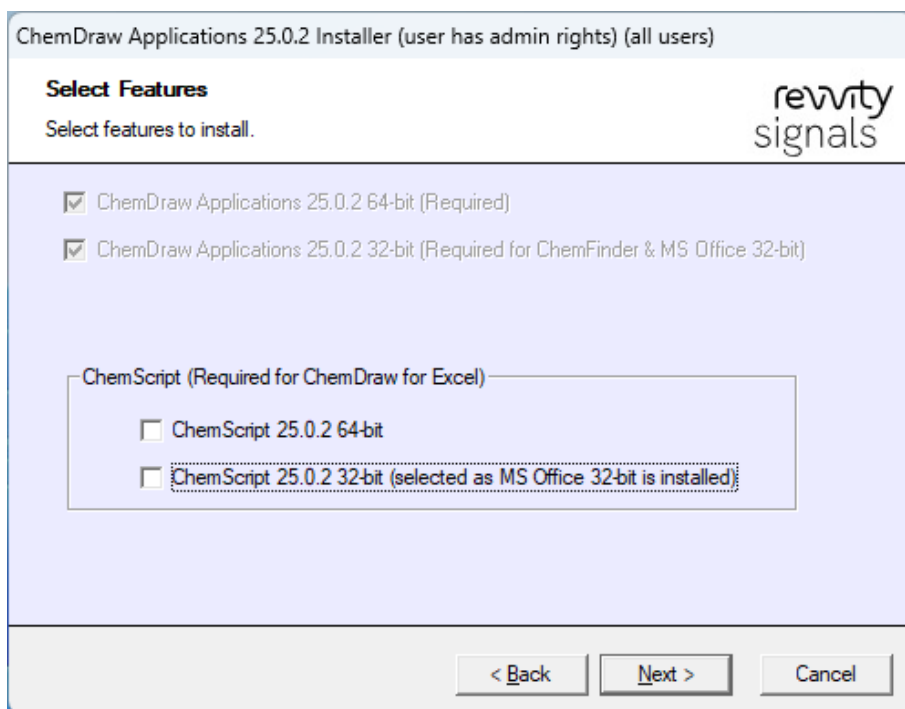

8. ChemFinder Ultra、もしくは ChemScript で Python を使用したい場合は、いずれかにチェックを入れ、**[Next]**をクリックします。

使用予定がない場合は、チェックを外してください。

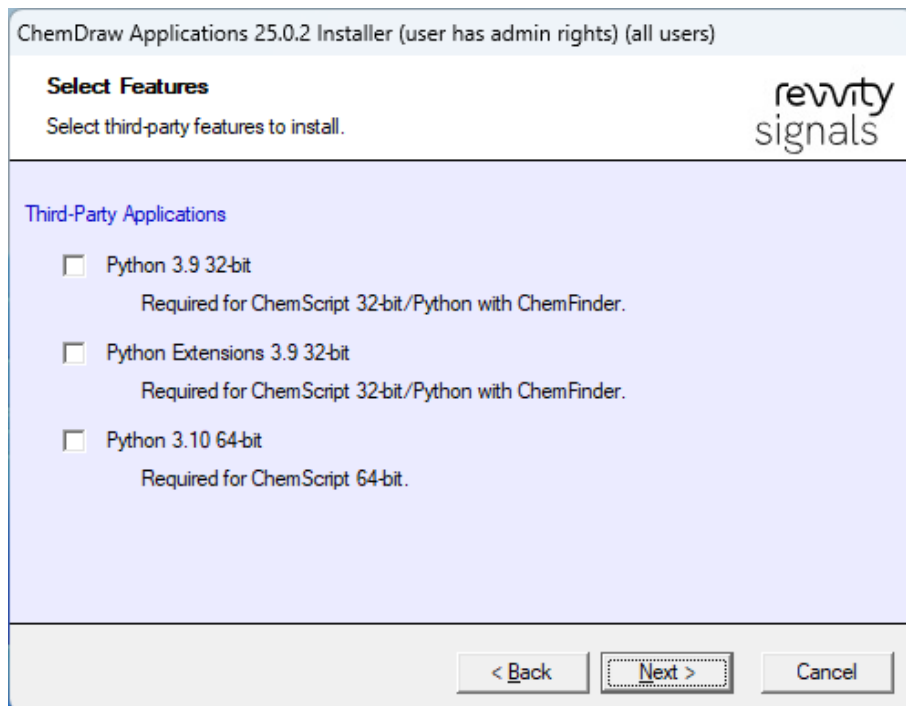

9. **[Install]**をクリックします。

インストール完了後は**[Finish]**をクリックして、インストーラーを終了してください。

