


インストールについて

1. [インストーラーの入手方法](#)
2. インストール方法
 - ChemDraw、ChemDraw Collections のインストール
 - [Windows 版](#)
 - [Mac 版](#)
 - [追加アプリケーション \(ChemDraw for Excel、Chem3D、ChemFinder、ChemFinder for Office、Chemscript\) のインストール](#)

インストーラーの入手方法

1. Signals Platform にアクセスし、ログインします。

Signals Platform の URL は、製品購入時に配信されている開発元からの通知メールを参照してください。

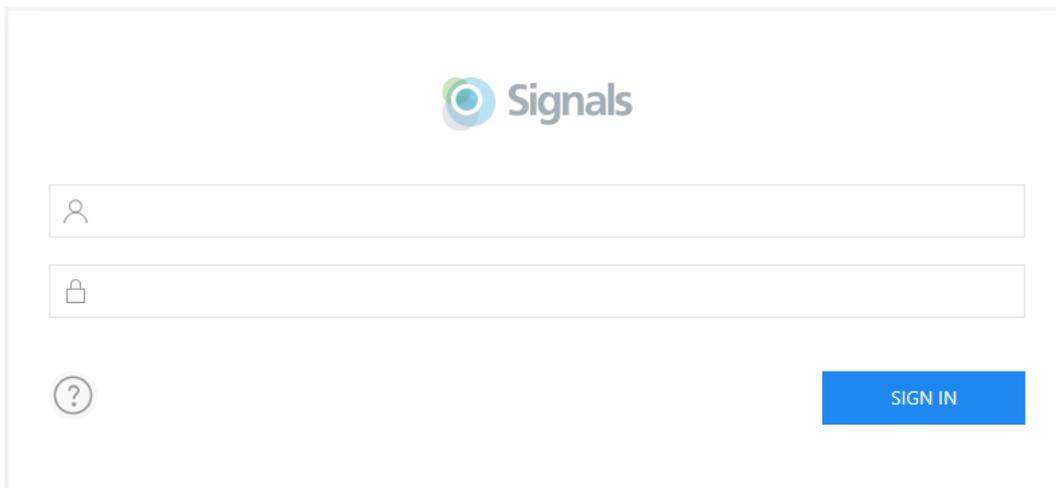

The image shows the login interface for the Signals Platform. At the top center is the 'Signals' logo, which consists of a blue circle with a white dot inside, followed by the word 'Signals' in a grey sans-serif font. Below the logo are two input fields: the first contains a person icon and the second contains a lock icon. To the left of the bottom input field is a circular help icon with a question mark. To the right of the bottom input field is a blue rectangular button with the text 'SIGN IN' in white capital letters.

2. Installers にある **ChemDraw Desktop Suite** をクリックします。

Installers



3. ChemDraw シリーズのダウンロード、インストール、アクティベーション方法がウィンドウで表示されます。

ChemDraw、および ChemDraw Collections をダウンロードしたい場合は、①の **Download** をクリックすることで、該当インストーラーが入手できます。

インストール方法


ChemDraw、ChemDraw Collections のインストール

Windows 版


1. 入手したインストーラーを右クリックして、メニューから**管理者として実行**を選択します。




2. 表示されるユーザーアカウント制御ウィンドウにて、**はい**をクリックします。

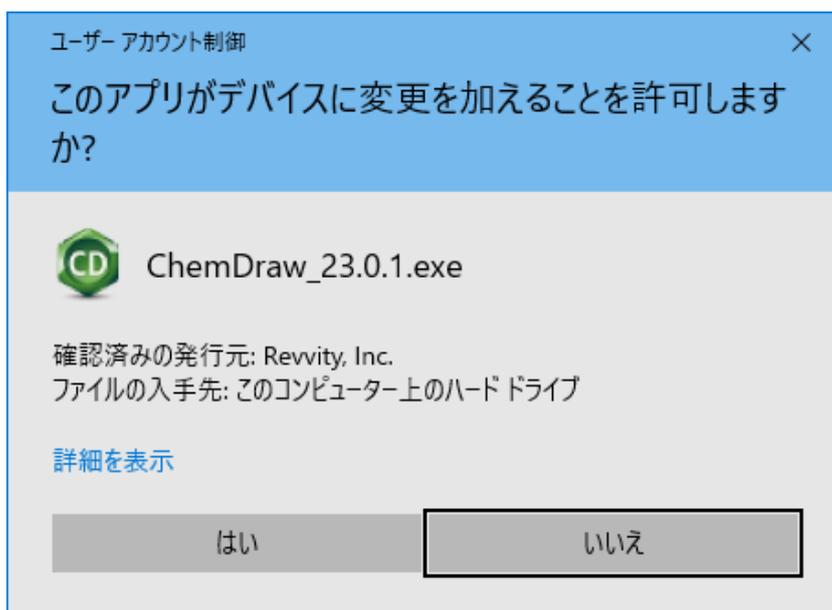


3. 解凍先のパスが表示されます。デフォルトのまま **OK** をクリックします。

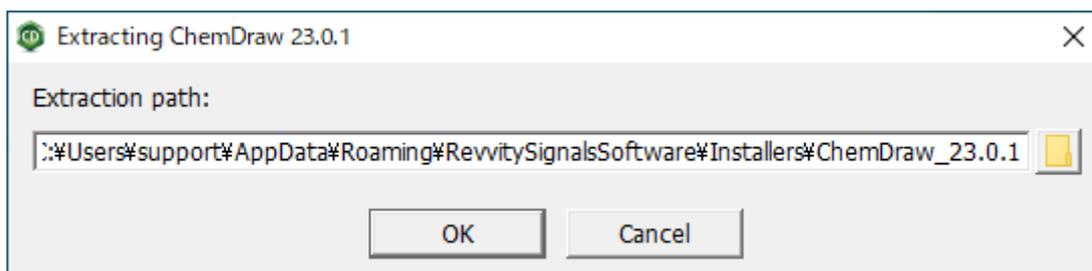


プログラムの解凍が終わるまで、少々お待ちください。

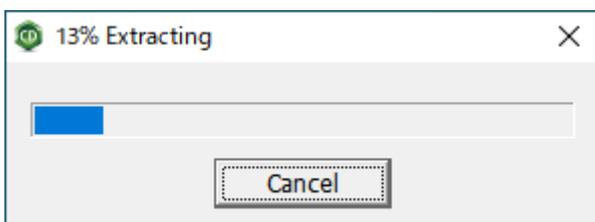


4. アクティベーションダイアログについての注意事項が表示されます。**OK**をクリックします。

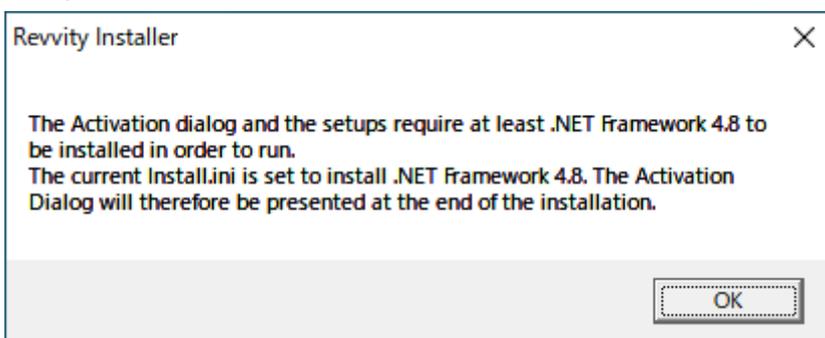


5. ChemDraw 23.0.1 Installer ウィンドウにて、**Next** を選択します。
この際、旧バージョンの ChemDraw がインストールされている場合は、旧バージョンのアンインストールが催促されます。製品のインストールには旧バージョンのアンインストールが必要なため、催促に従ってアンインストールを実行してください。

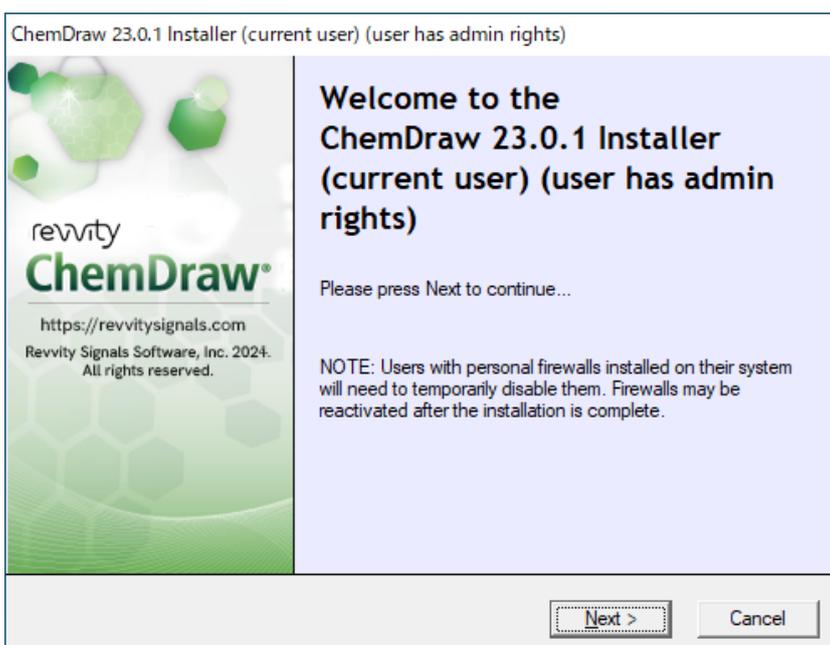

6. 使用許諾が表示されます。ライセンス条項をスクロールして内容を最後まで確認し、承認する場合は「I accept the terms in this license agreement」にチェックを入れ、**Next** をクリックします。

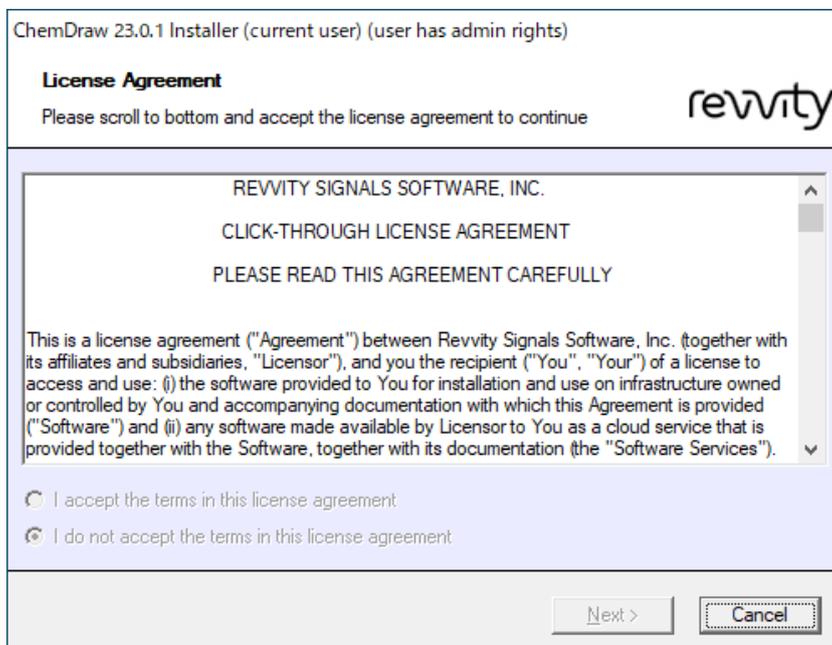


7. インストール先のフォルダーを選択し、**Next** をクリックします。この際、インストール先のフォルダーは Default で問題ありません。

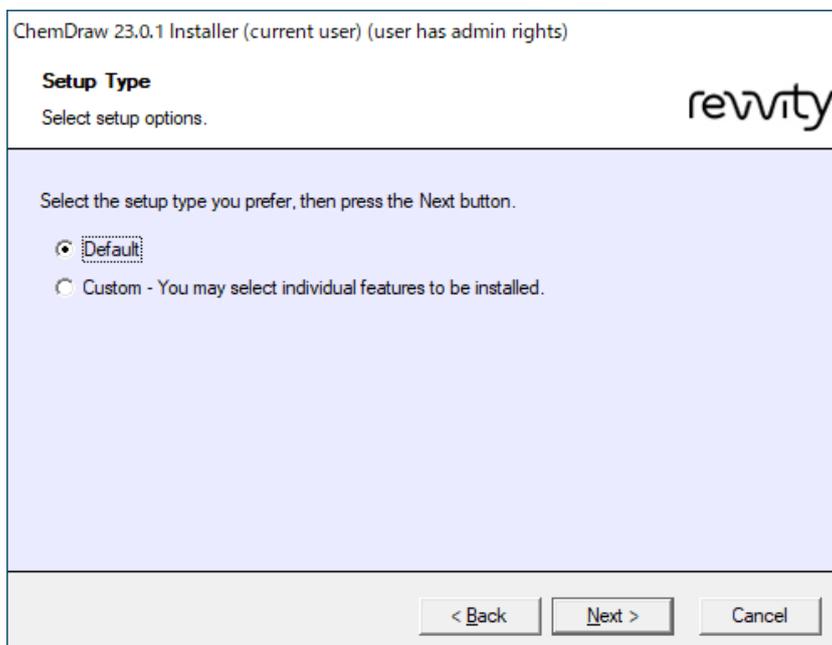


8. ChemDraw Collections を使用したい場合は、ChemDraw Collections にチェックを入

れ、**Next** をクリックします。

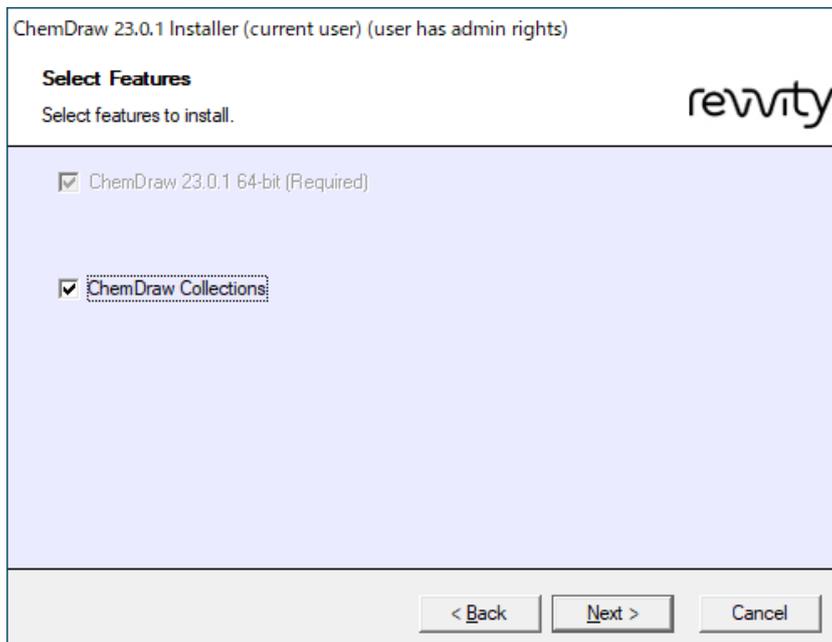

9. **Install** ボタンをクリックします。

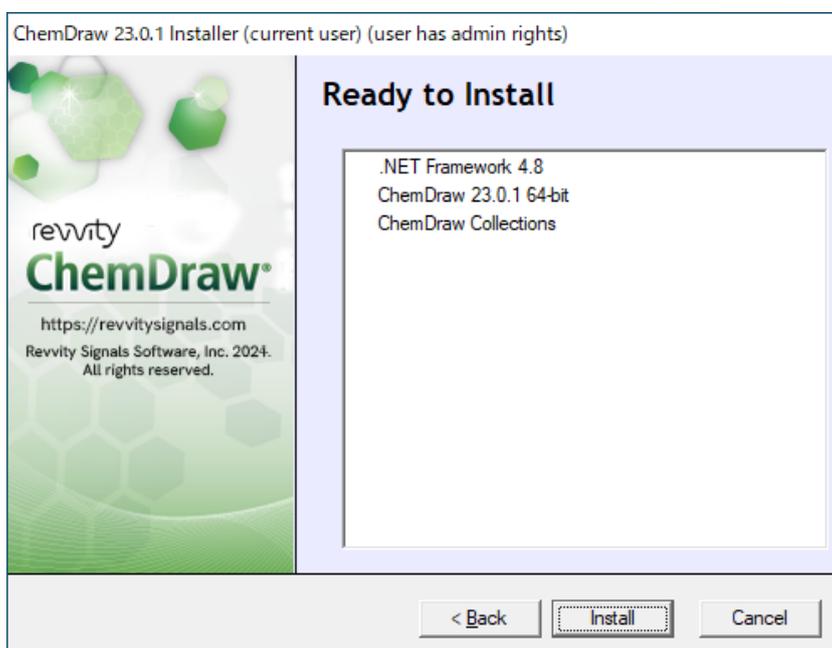

プログラムが順にインストールされ、インストールが完了します。

Mac 版

1. 入手したインストーラーをダブルクリックします。



2. 使用許諾が表示されます。ライセンス条項をスクロールして内容を最後まで確認し、承認する場合は **Agree** をクリックします。



プログラムの解凍が終わるまで、少々お待ちください。



3. オープニングウィンドウが表示されます。


ChemDraw のアイコンを **Applications** フォルダへドラッグ&ドロップします。

また、ChemDraw Collections を使用したい場合は、ChemDraw Collections のアイコン

を **Applications** フォルダへドラッグ&ドロップします。



4. Applications フォルダから ChemDraw を起動すると、アクティベーションのための Licensing ウィンドウが表示されます。弊社サポートページの「アクティベーション方法」を参照し、アクティベーションを実行してください。

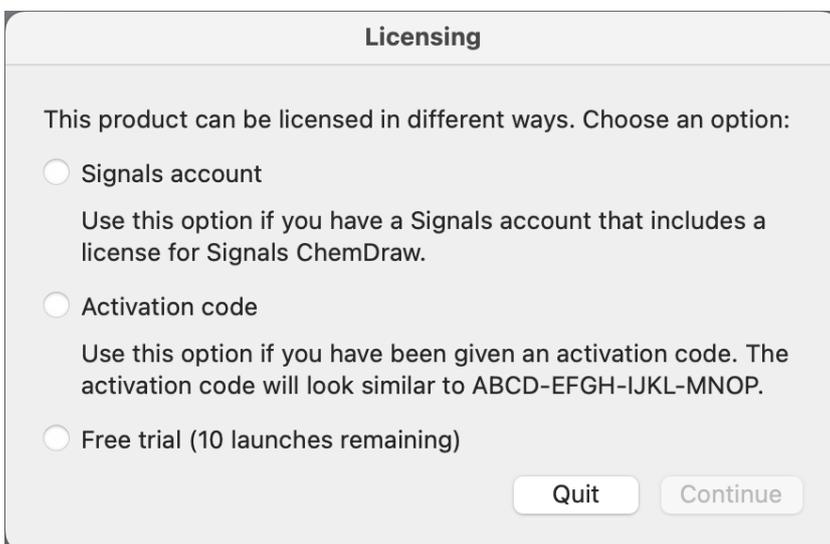

5. インストールウィンドウが表示されます。**Install** ボタンをクリックして、インストールは完了です。

Installation

ChemDraw will create folders in this path, where you can put your files and personalized templates, stationery, samples, scripts, nicknames, etc.

support > Library > Application Support > com.revity.ChemDraw

You can also choose a custom location for the ChemDraw configuration.

Choose Custom Location...

Clear Custom Location

Cancel

Install

追加アプリケーション (ChemDraw for Excel、Chem3D、ChemFinder、ChemFinder for Office、Chemscript) のインストール

注意! これらのアプリケーションは Windows 版でのみ使用可能です。


1. 入手したインストーラーを右クリックして、メニューから**管理者として実行**を選択します。




2. 表示されるユーザーアカウント制御ウィンドウにて、**はい**をクリックします。




3. 解凍先のパスが示されます。デフォルトのまま **OK** をクリックします。

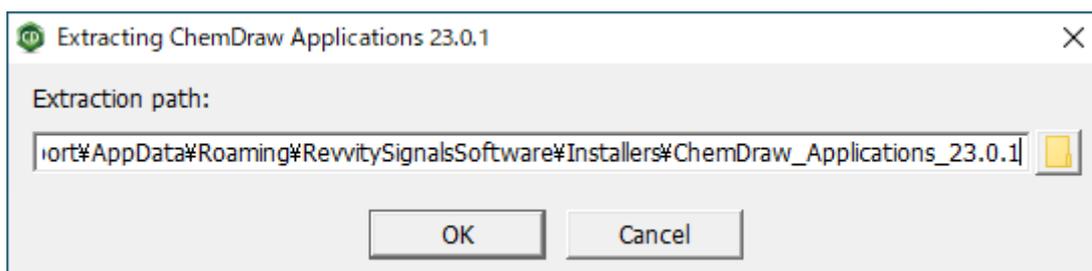

プログラムの解凍が終わるまで、少々お待ちください。

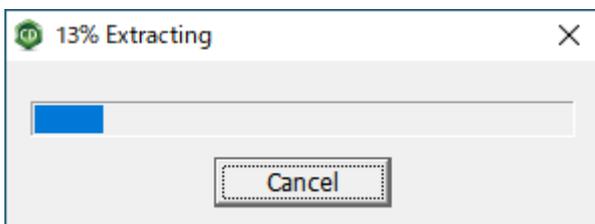


4. アクティベーションダイアログについての注意事項が表示されます。**OK** をクリックします。

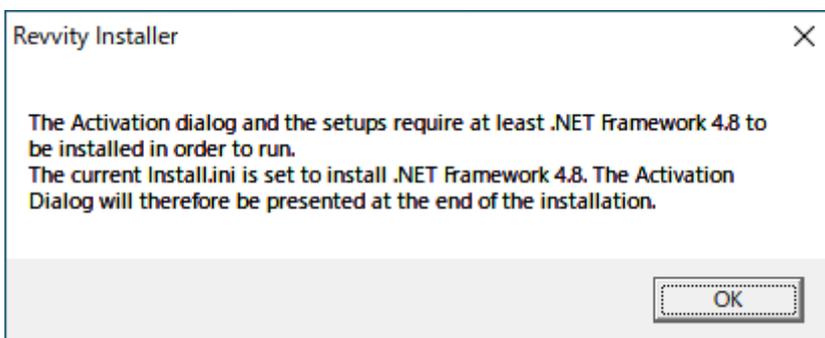

5. アプリケーションのバージョン番号についての注意事項が表示されます。**はい** を選択します。


なお、インストールされている ChemDraw と、インストールしようとしている追加アプリケーションが異なるバージョンの場合には、アンインストールのステップが必要になります。

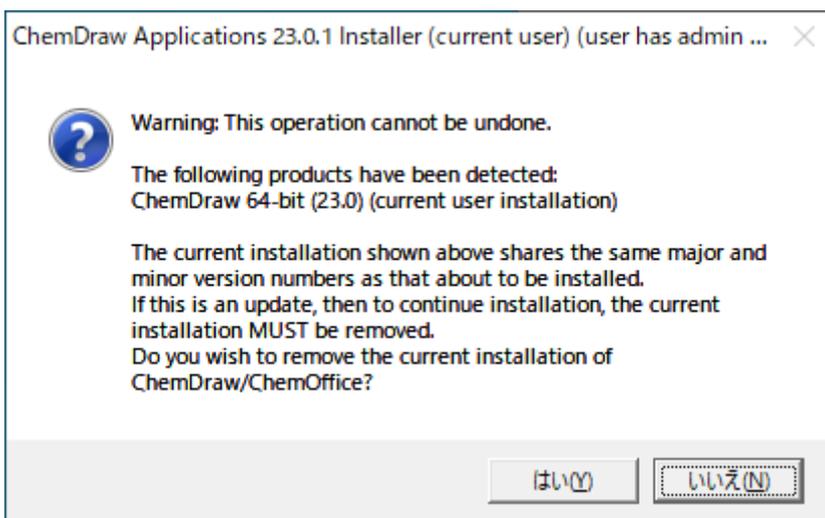

6. ChemDraw Applications 23.0.1 Installer ウィンドウにて、**Next** を選択します。




7. 使用許諾が表示されます。ライセンス条項をスクロールして内容を最後まで確認し、承認する場合は「I accept the terms in this license agreement」にチェックを入れ、**Next**をクリックします。

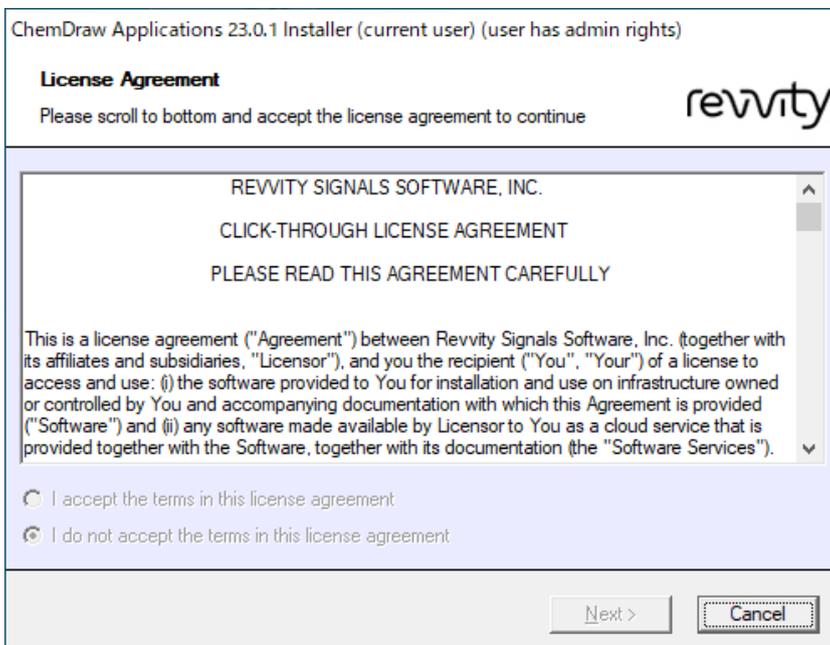

8. インストール先のフォルダーを選択し、**Next** をクリックします。この際、インストール先のフォルダーは Default で問題ありません。




9. ChemScript を使用したい場合は、32-bit/64-bit いずれかにチェックを入れ、**Next** をクリックします。
- また、ChemDraw Collections をインストールしていない場合、このタイミングでインストールの判断を行うことも可能です。

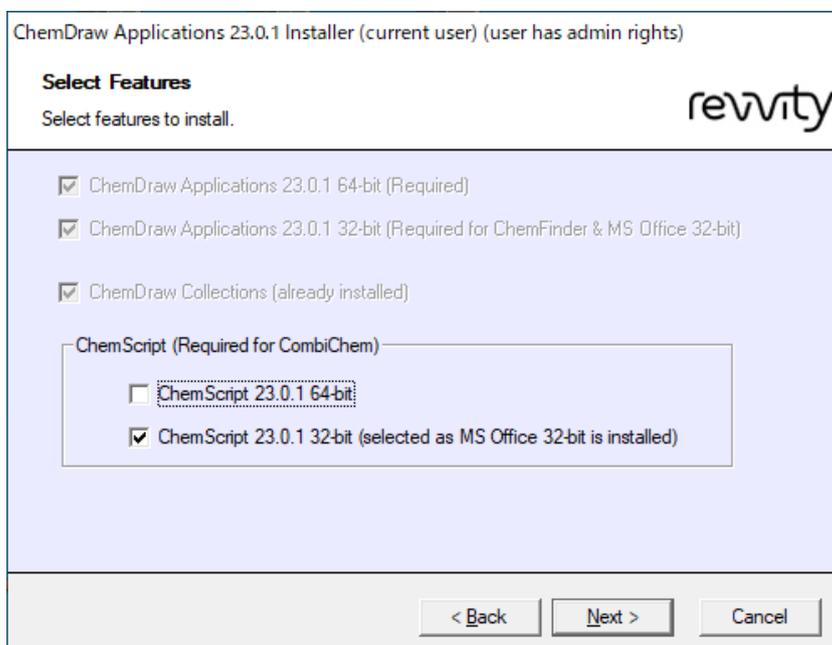


10. ChemFinder Ultra や ChemScript で Python を使用したい場合は、いずれかにチェックを入れ、**Next** をクリックします。使用予定がない場合は、チェックを外して Next をク

リックします。

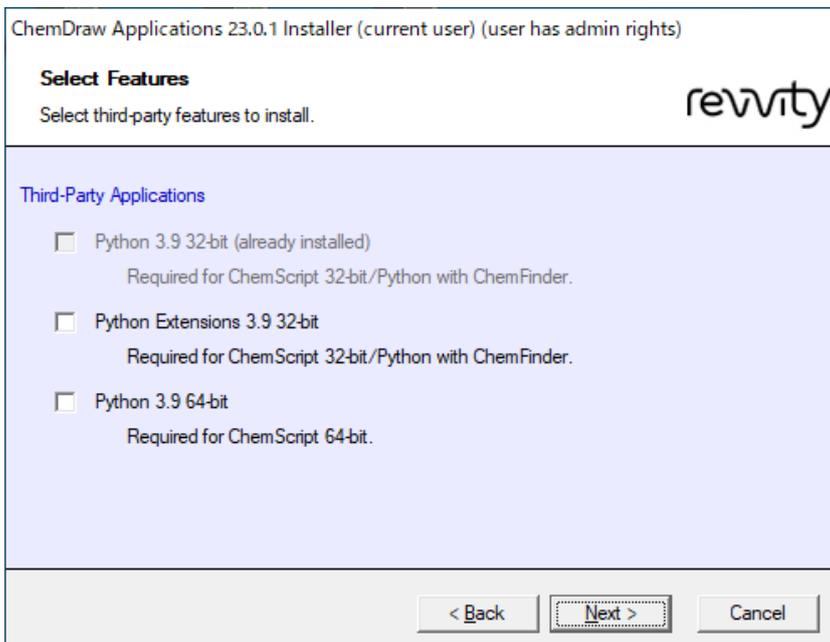

11. **Install** ボタンをクリックします。

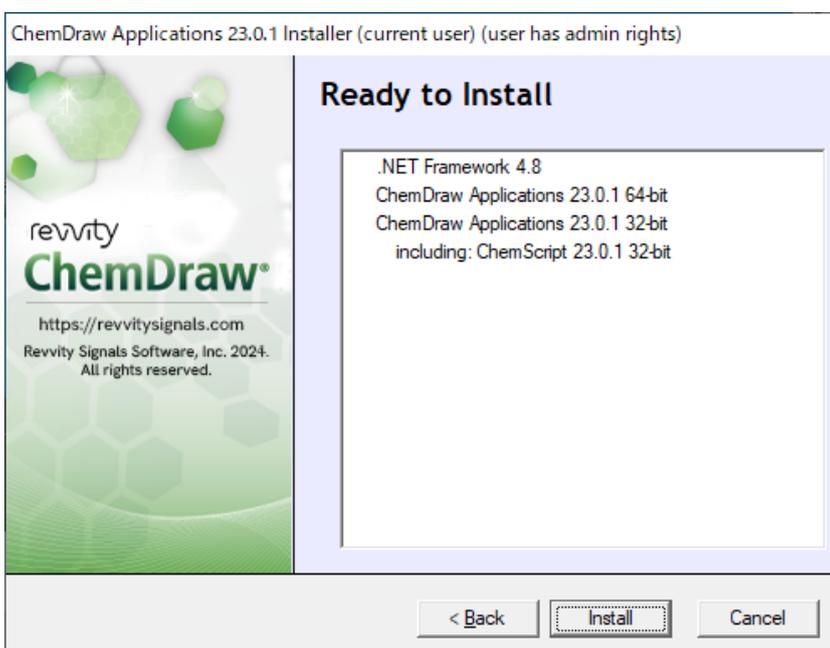

プログラムが順にインストールされ、インストールが完了します。