


インストールについて

1. [各種インストーラーの入手方法](#)
2. インストール方法
 - ChemDraw のインストール
 - [Windows 版](#)
 - [Mac 版](#)
 - ChemDraw Collections のインストール
 - [Windows 版](#)
 - [Mac 版](#)
 - [追加アプリケーション \(ChemDraw for Excel、Chem3D、ChemFinder、ChemFinder for Office、Chemsript\) のインストール](#)

各種インストーラーの入手方法


1. Signals Platform にアクセスし、ログインします。

Signals Platform の URL は、製品購入時に配信されている開発元からの通知メールを参照してください。

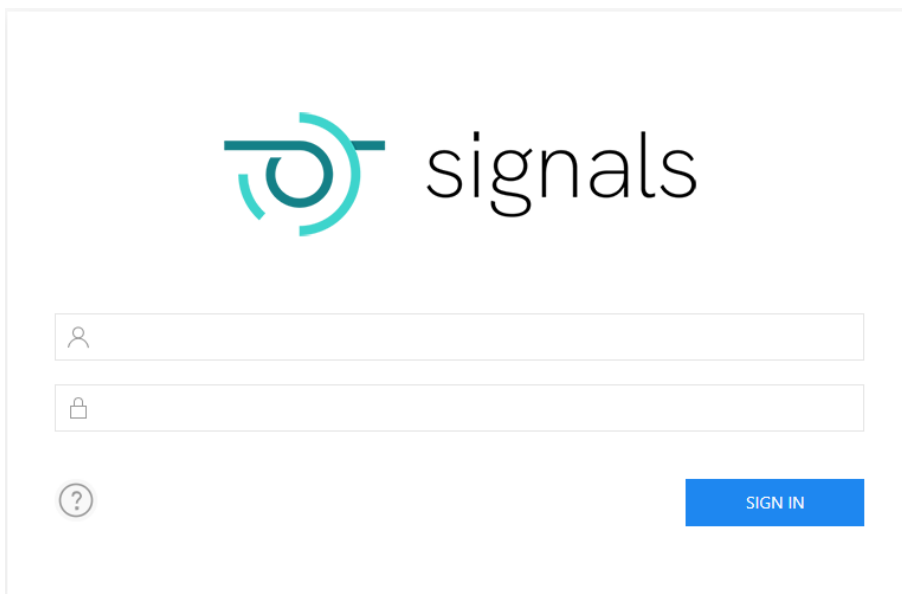

2. Installers にある **ChemDraw Installers** をクリックします。

Installers

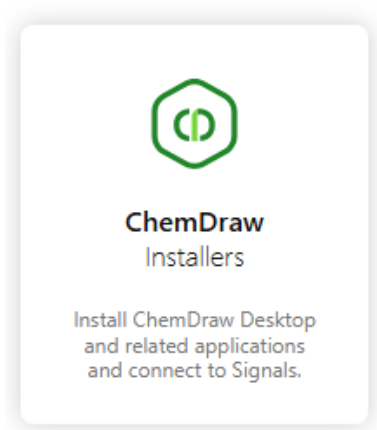

3. 各種インストーラーがダウンロード可能なため、状況に合わせてインストーラーをダウンロードください。

ChemDraw をインストールしたい場合：

ChemDraw Desktop をダウンロードください。

ChemDraw Collections をインストールしたい場合：

ChemDraw Collections をダウンロードください。

追加アプリケーション（ChemDraw for Excel、Chem3D、ChemFinder、ChemFinder for Office、ChemScript）をダウンロードしたい場合：

ChemDraw Desktop と **ChemDraw applications** をダウンロードください。

注意！ アクセスしている端末の OS に対応したインストーラーが入手できます。

注意！ 追加アプリケーションは、Windows でのみ利用可能です。

×

Install and Activate ChemDraw Desktop and ChemDraw Collections

① Download and install ChemDraw Desktop and/or ChemDraw Collections.

↓ ChemDraw Desktop

↓ ChemDraw Collections

Once downloaded, open each file and follow the instructions to install on your computer.

② If installed, sign-in to connect ChemDraw Desktop to Signals and activate your license.

Connect

Click the button above to open ChemDraw Desktop.
You will be prompted to authenticate with your Signals username and password to activate and connect to Signals.
Once authenticated, you should have access to ChemDraw Desktop.

③ If installed, sign-in to connect ChemDraw Collections to Signals and activate your license.

Connect

Click the button above to open ChemDraw Collections.
You will be prompted to authenticate with your Signals username and password to activate and connect to Signals.
Once authenticated, you should have access to ChemDraw Collections.

④ Optionally download and install additional ChemDraw applications for Windows only (ChemDraw for Excel, Chem3D, ChemFinder, ChemFinder for Office and Chemsript).

↓ ChemDraw applications

Once downloaded, open the file and follow instructions to install on your computer. This step should be completed after ChemDraw Desktop is installed.

If you have any difficulty with any of these steps, click here to [contact product support](#).

Signals Domain URL

https://

signalsresearch.revvitycloud.jp

📋

Use your Signals username and password.


Close

インストール方法


ChemDraw のインストール

Windows 版


1. 入手したインストーラーを右クリックして、メニューから**[管理者として実行]**を選択します。
2. インストールファイルの解凍先のパスが表示されます。
デフォルトの設定のまま**[OK]**を選択します。

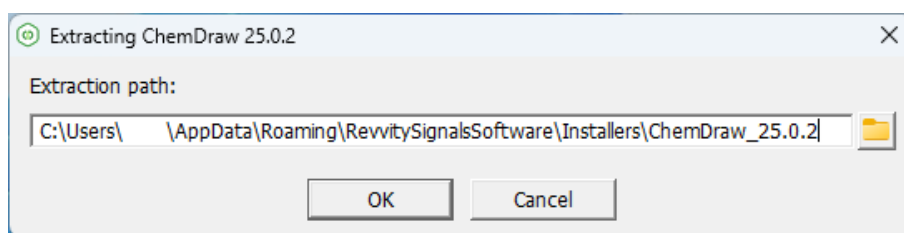

3. 表示されるユーザーアカウント制御ウィンドウにて、**[はい]**を選択します。

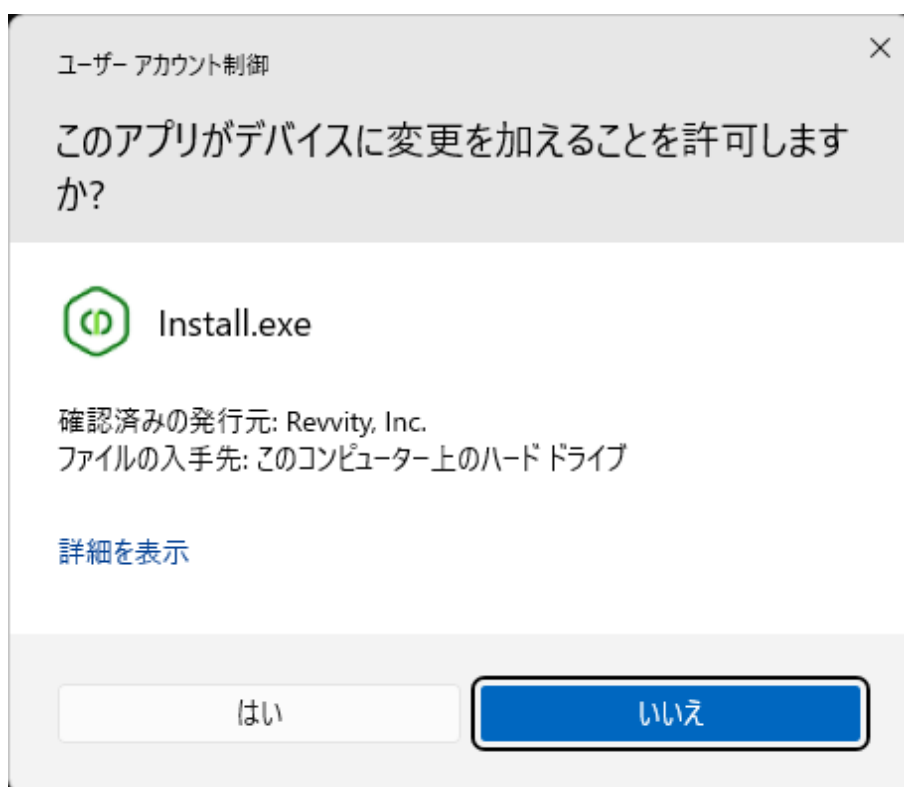

4. ChemDraw 25.0.2 Installer ウィンドウにて、**[Next]**を選択します。

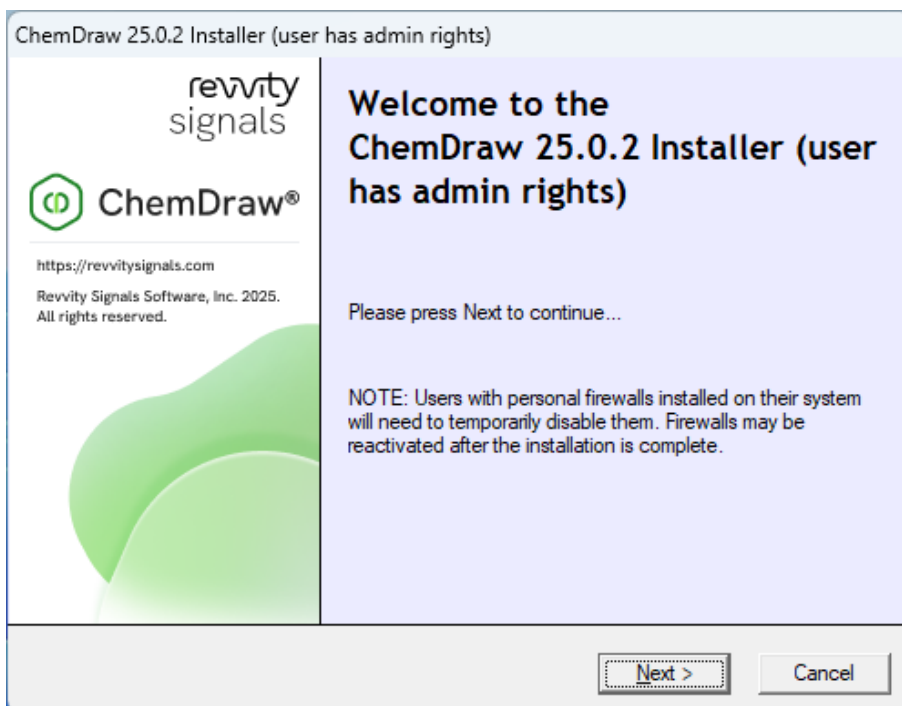


なお、旧バージョンの ChemDraw がインストールされている場合は、旧バージョンのアンインストールが催促されます。
催促に従ってアンインストールを実行してください。

5. 使用許諾が表示されます。


内容を確認の上、**[I accept the terms in this license agreement]**にチェックを入れ、**[Next]**をクリックします。



6. 運用状況に合わせてインストールのタイプを選択し、**[Next]**をクリックします。

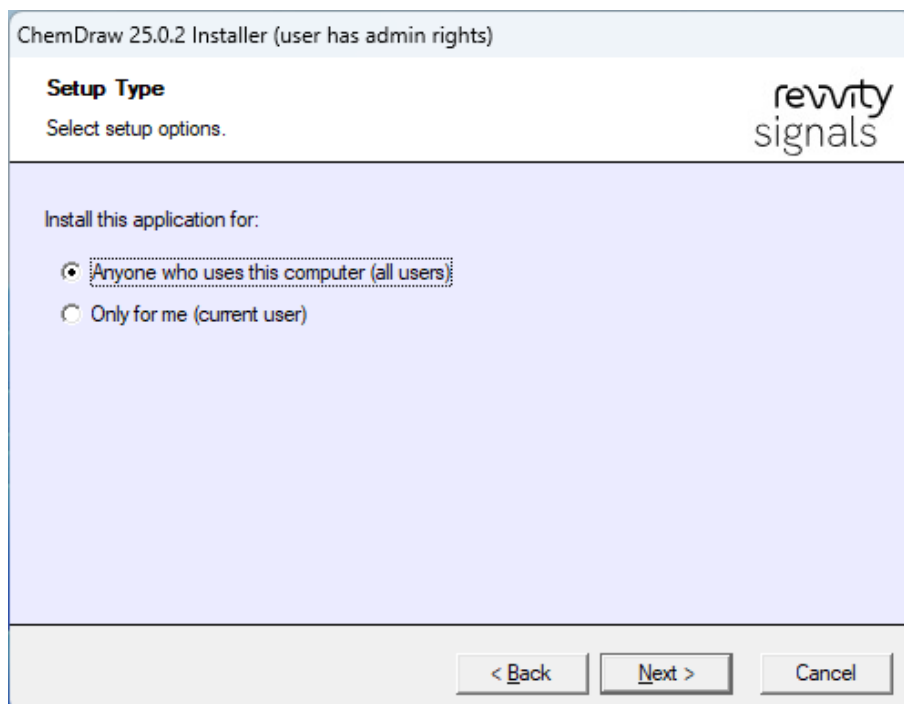


7. **[Next]**をクリックします。

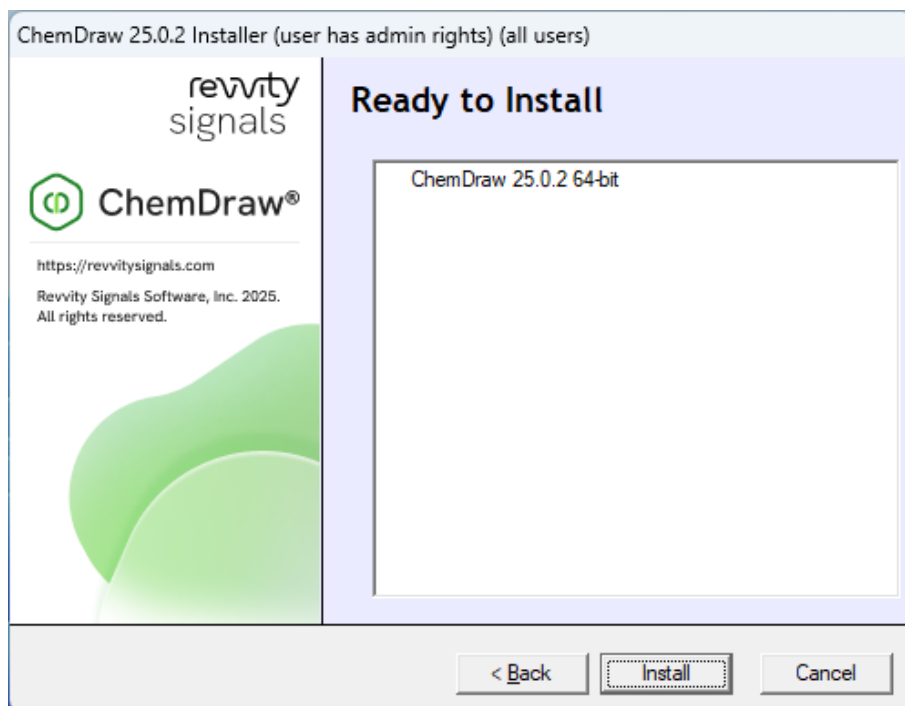


8. **[Install]**をクリックします。

インストール完了後は**[Finish]**をクリックして、インストーラーを終了してください。

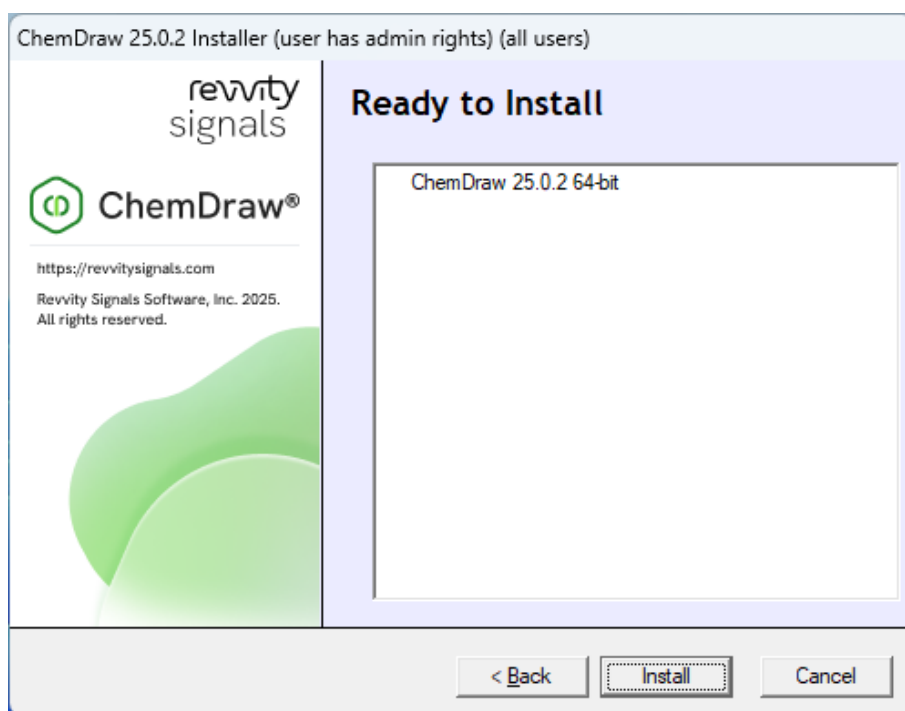

↓

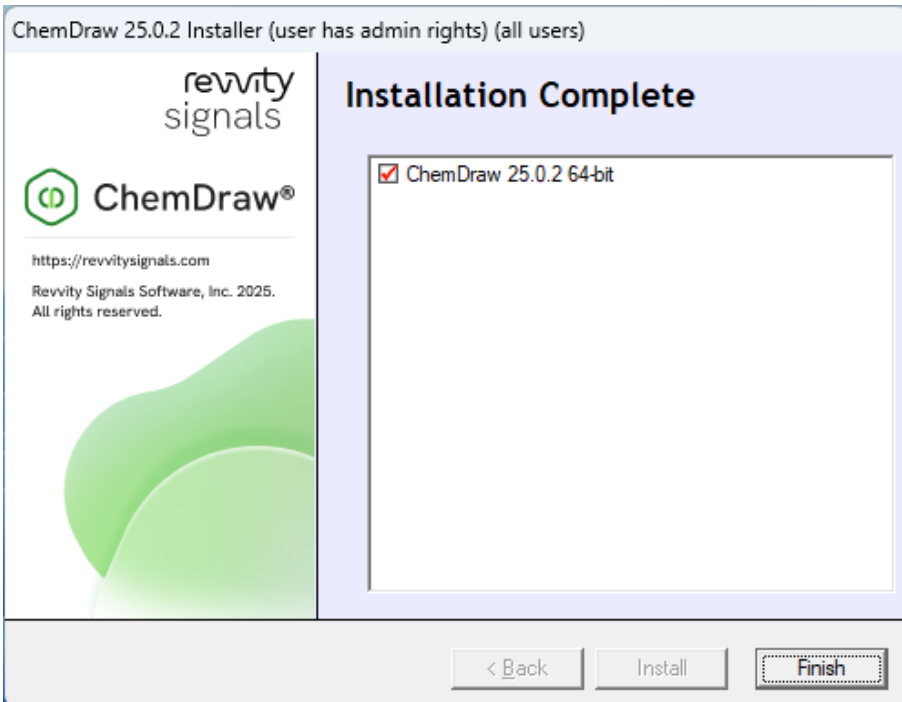


Mac 版

1. 入手したインストーラーをダブルクリックします。

2. 使用許諾が表示されます。

内容を確認の上、[Agree]をクリックします。

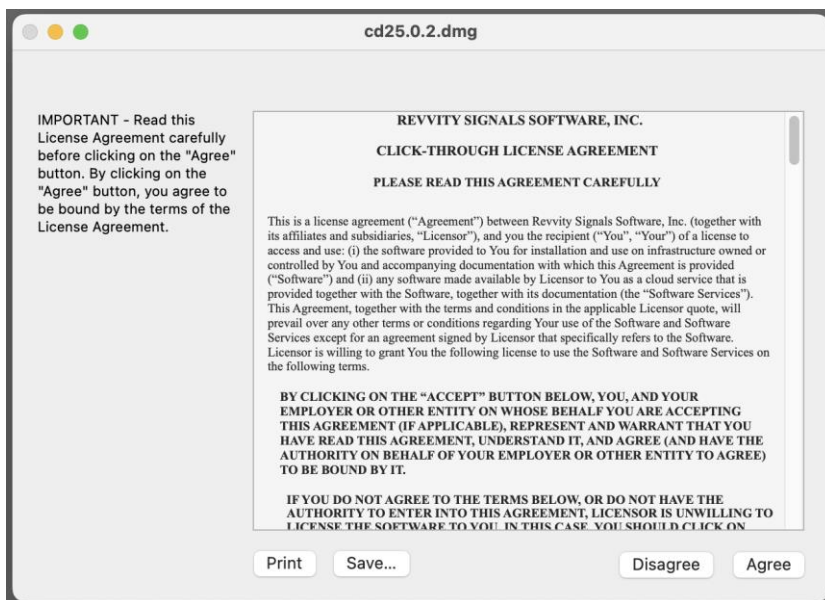

3. ChemDraw のアイコンを[Applications]フォルダーへドラッグ&ドロップして、インストールが完了します。




ChemDraw Collections のインストール

Windows 版

1. 入手したインストーラーを右クリックして、メニューから[管理者として実行]を選択します。
2. ライセンス契約書が表示されます。
内容を確認の上、[同意する]をクリックすると、インストールが始まります。



3. インストール完了後、アプリケーションが立ち上がります。

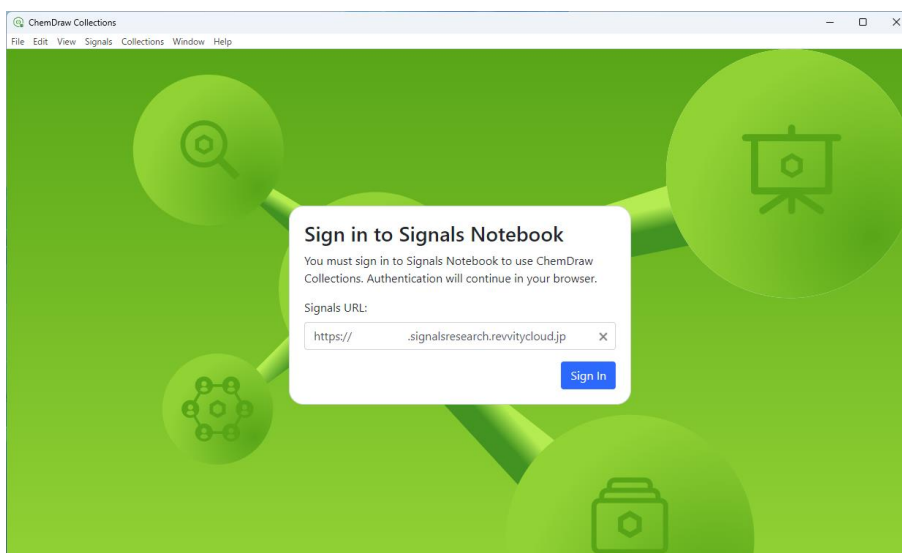


Mac 版


1. 入手したインストーラーをダブルクリックします。

2. 使用許諾が表示されます。

内容を確認の上、[Agree]をクリックします。

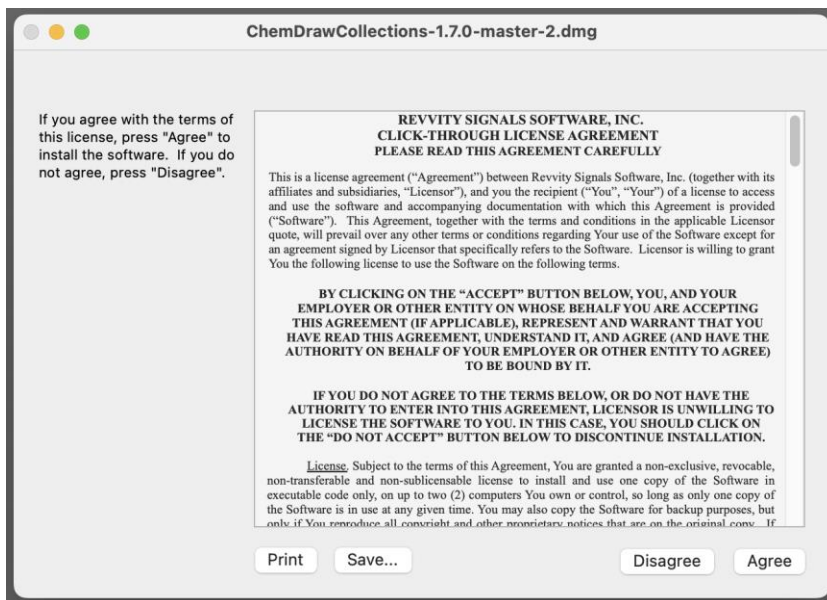

3. ChemDraw Collections のアイコンを[Applications]フォルダーへドラッグ&ドロップして、インストールが完了します。

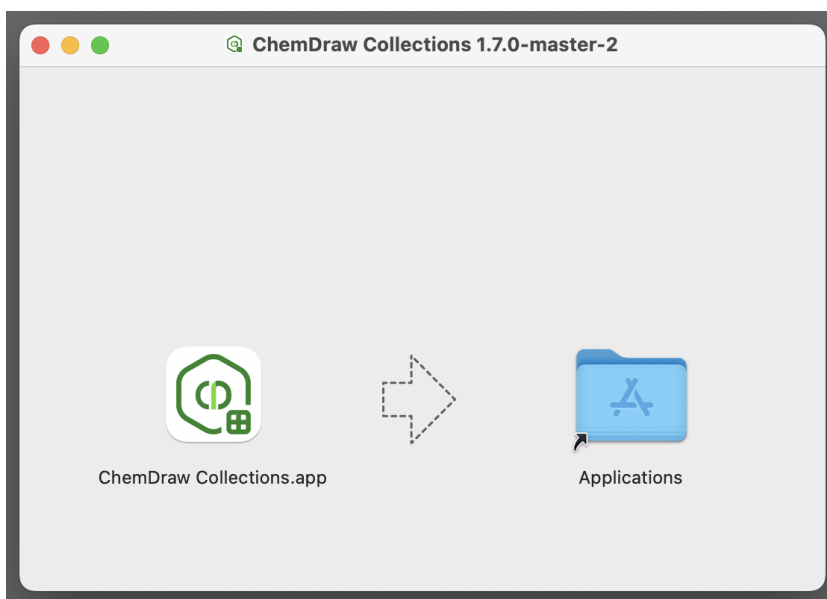


追加アプリケーション（ChemDraw for Excel、Chem3D、ChemFinder、ChemFinder for Office、Chemscript）のインストール


注意！ 追加アプリケーションは、Windows 版でのみ利用可能です。

注意！ 事前に、ChemDraw をインストールしておく必要があります。


1. 入手したインストーラーを右クリックして、メニューから**管理者として実行**を選択します。
2. インストールファイルの解凍先のパスが表示されます。
デフォルトの設定のまま**[OK]**を選択します。

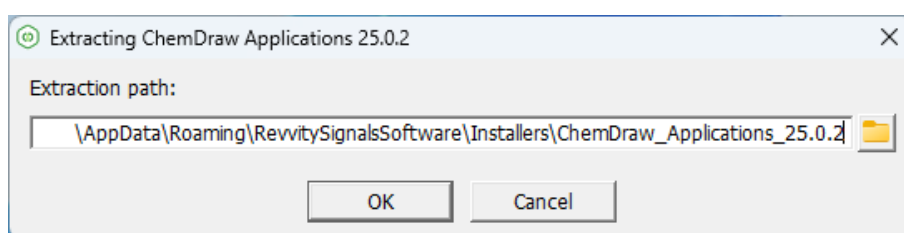

3. 表示されるユーザーアカウント制御ウィンドウにて、**[はい]**を選択します。

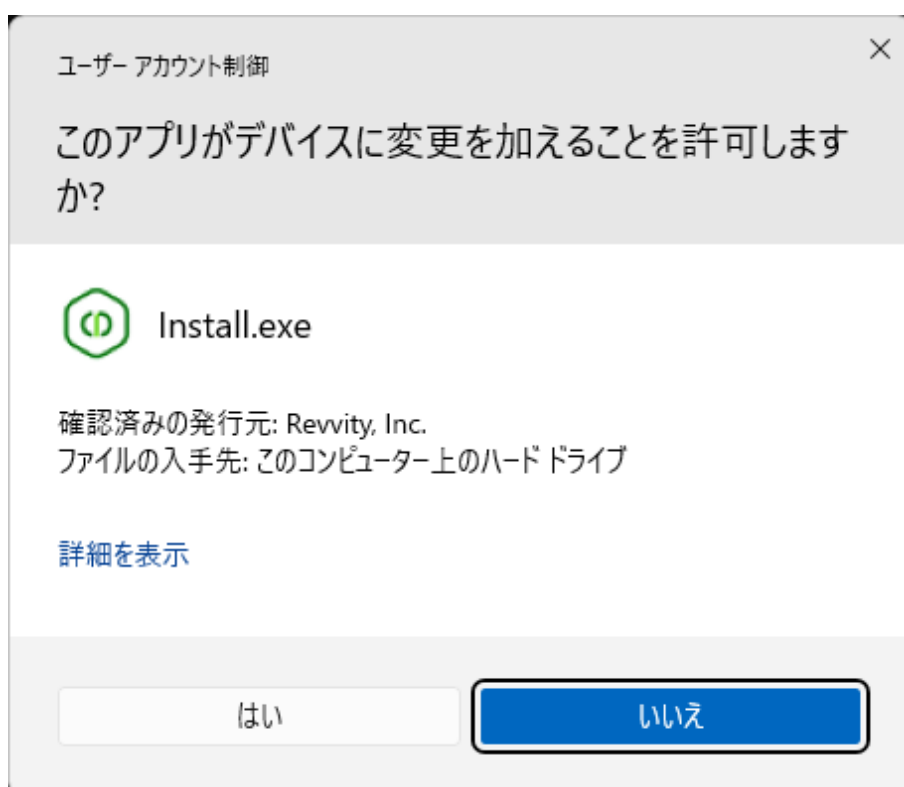


4. ChemDraw Applications 25.0.2 Installer ウィンドウにて、[Next]を選択します。

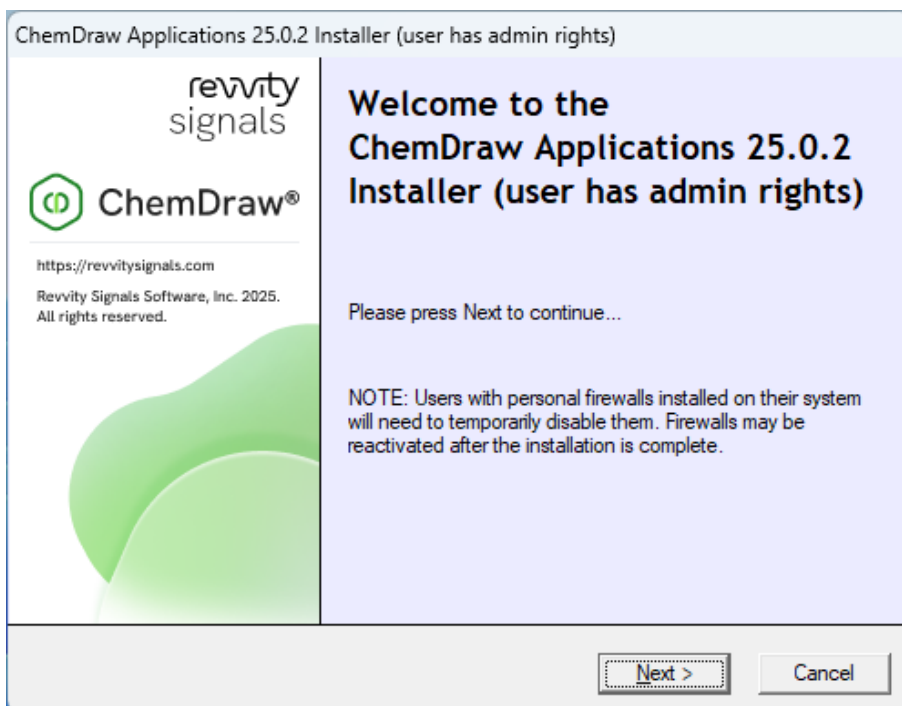


5. 使用許諾が表示されます。
内容を確認の上、[I accept the terms in this license agreement]にチェックを入れ、[Next]をクリックします。



6. 運用状況に合わせてインストールのタイプを選択し、[Next]をクリックします。

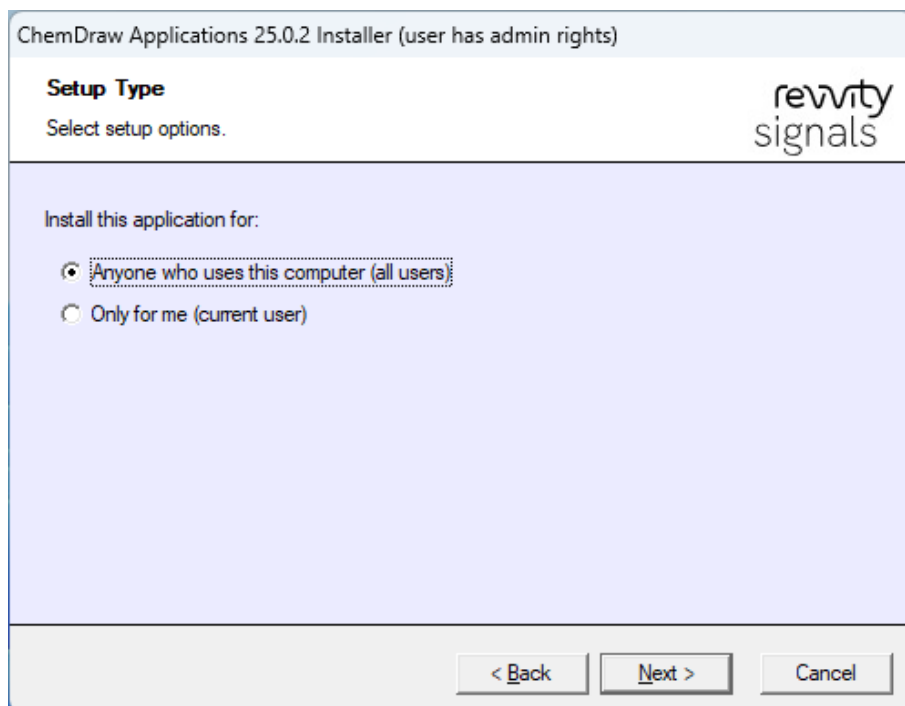


7. ChemScript を使用したい場合は、32-bit/64-bit いずれかにチェックを入れ、[Next]をクリックします。

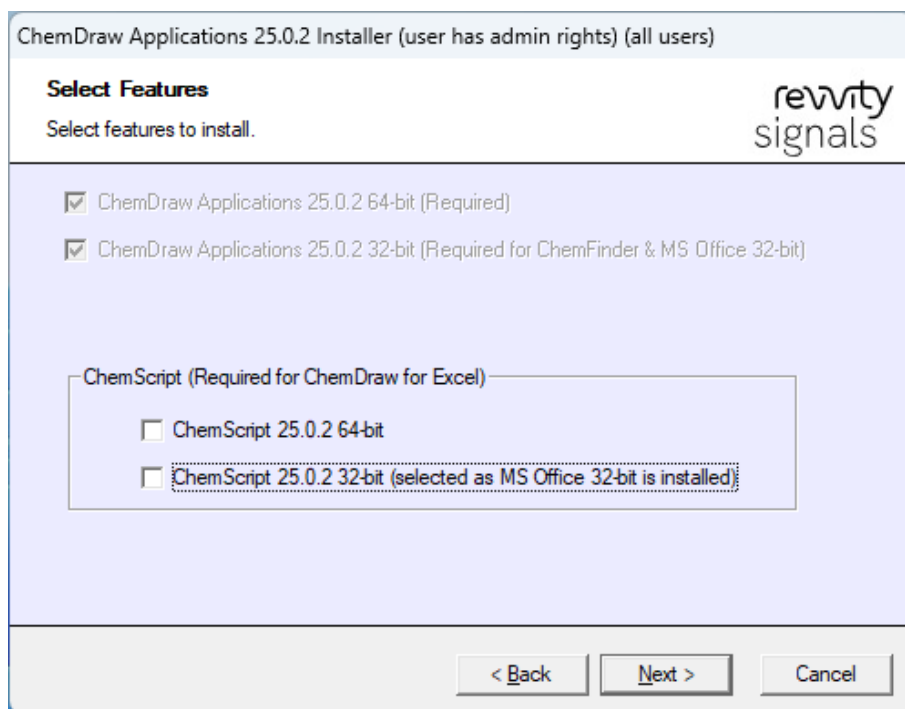

8. ChemFinder Ultra、もしくは ChemScript で Python を使用したい場合は、いずれかにチェックを入れ、[Next]をクリックします。

使用予定がない場合は、チェックを外してください。

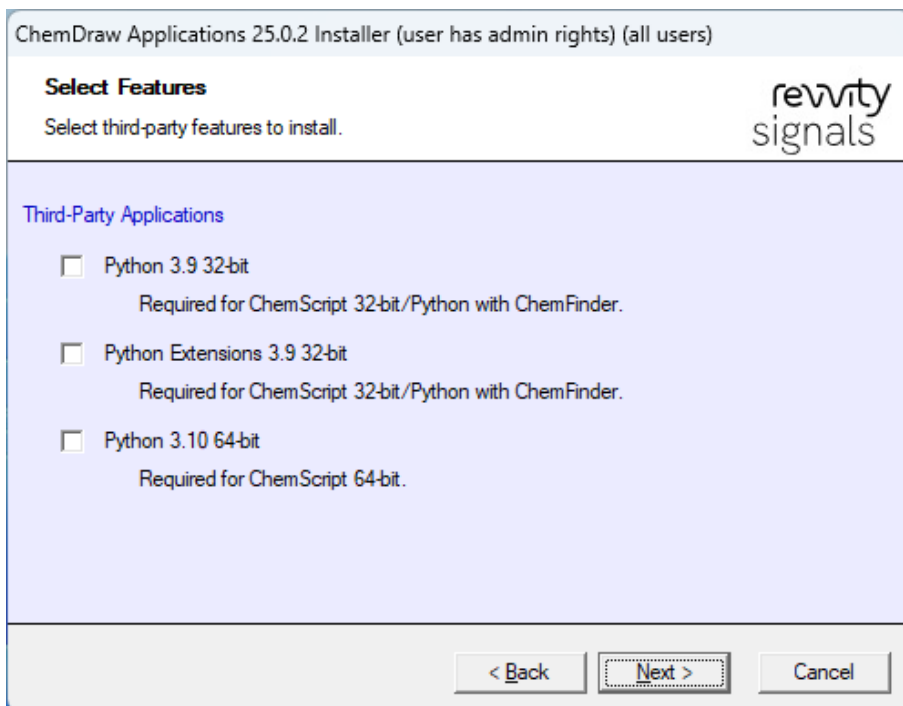

9. [Install]をクリックします。

インストール完了後は[Finish]をクリックして、インストーラーを終了してください。

